

nosiboo^{*}eco
manual nasal aspirator

Manuale d'istruzioni

Aspiratore nasale manuale Nosiboo ECO

ITA



E-Mail: customerservice@nosiboo.com

Web: www.nosiboo.eu

Tel: +36 72 551 642




Prodotto da: ATTRACT KFT.

H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 Ungheria

Made in EU



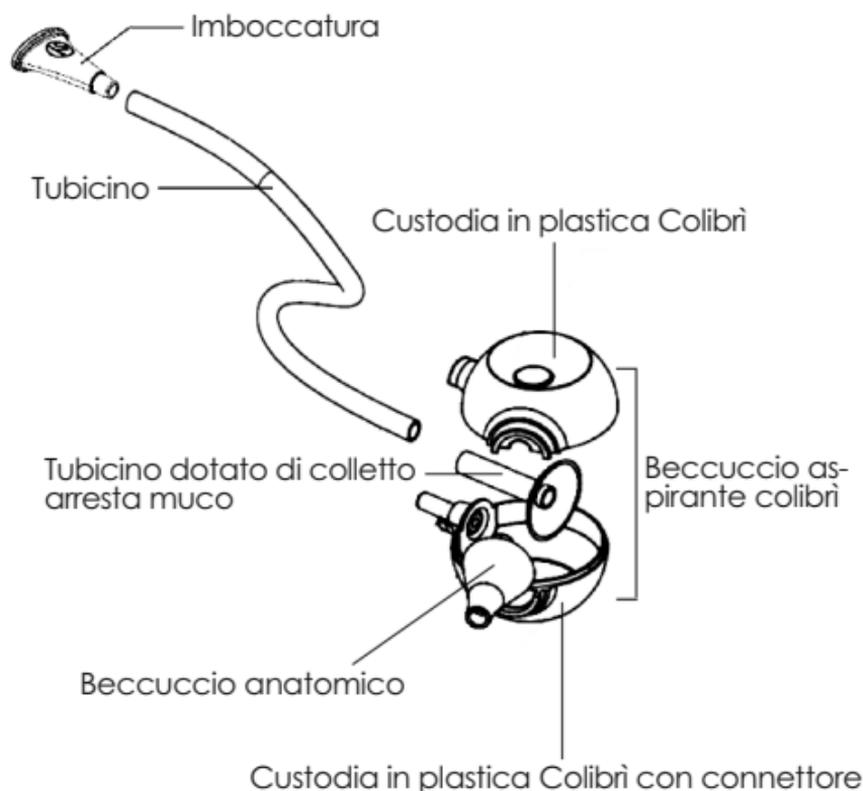

Normative sulla sicurezza

Il mancato rispetto delle precauzioni per gli scenari di pericolo sotto indicati potrebbe causare gravi ferimenti o addirittura incidenti mortali.

Avvertenza – Il dispositivo può essere usato esclusivamente per la rimozione del muco nasale dei bambini. Disinfettare il beccuccio aspirante Colibrì dopo ogni utilizzo. Non lasciare i componenti smontati del Nosiboo ECO alla portata dei bambini perché potrebbero essere ingeriti e causare soffocamento. Il dispositivo può essere usato solo da persone adulte. Non lasciare mai il dispositivo incustodito vicino ai bambini o a persone con ridotte capacità fisiche o mentali.

Assicurarsi che tutti i pezzi siano montati correttamente prima di usare il dispositivo. Se dovessero verificarsi rash cutanei o rossore sul naso del bambino dopo aver utilizzato il dispositivo, interrompere l'utilizzo. Consultare un dottore. Non usare il dispositivo in caso di emofilia, se i capillari della membrana della mucosa del tratto respiratorio si allargano, in caso di frequenti sanguinamenti dal naso, se si stanno assumendo degli anti coagulanti, in caso di malformazioni congenite (per esempio palatoschisi).

1. Impiego previsto

Prevenzione delle complicazioni causate da raffreddori nei bambini e accelerazione del processo di guarigione grazie alla rimozione del muco nasale. Raccomandato per bambini fino a 4 anni che non sono in grado di rimuovere il muco in modo autonomo soffiandosi il naso. Il vuoto necessario per l'aspirazione è creato tramite la bocca dell'utilizzatore, grazie al design separato in modo indiretto.

I neonati devono essere distesi, i bambini piccoli devono stare seduti in una posizione stabile durante l'operazione di aspirazione. Portare l'imboccatura alla bocca e inserire il beccuccio anatomico precedentemente disinfettato nella cavità nasale, puntando leggermente verso l'esterno, verso l'occhio. Da questa posizione, sarà possibile muovere leggermente la punta mentre si continua a eseguire l'aspirazione con la bocca attraverso il tubicino. Il punto di collegamento del tubicino deve puntare in basso durante l'utilizzo. Il muco secco o molto denso può essere sciolto usando soluzioni saline. Non usare più di 5 ml di queste ogni volta. Attendere alcuni minuti dopo aver usato la soluzione, successivamente usare l'aspiratore nasale. Nosiboo ECO può contenere fino a 5 ml di sostanza liquida. Il liquido aspirato si accumula nella parete interna della bocchetta e grazie al suo design elaborato, il liquido non può uscire dal beccuccio aspirante Colibrì, quindi può essere usato in tutta sicurezza anche senza filtro.

2. Introduzione e avvio del dispositivo

1. Pulire le parti del beccuccio aspirante colibrì (consultare i capitoli Pulizia e Conservazione)
2. Inserire il tubicino dotato di colletto arresta-muco nella metà dell'alloggiamento Colibrì dotata di connessione
3. Posizionare la metà della custodia di plastica Colibrì non dotata di connessione nella posizione corretta
4. Spingere il beccuccio anatomico sulla flangia corrispondente
5. Collegare la parte finale del tubicino alla connessione del beccuccio aspirante Colibrì
6. Collegare l'altro finale del tubicino all'imboccatura

Il dispositivo può essere usato più volte al giorno; lo scopo primario del dispositivo è quello di aiutare il bambino a respirare meglio. Frequenza consigliata di utilizzo: più volte al giorno se necessario, dopo il risveglio, prima di mangiare e di dormire.

3. Pulizia e Conservazione – Il beccuccio aspirante Colibrì può essere separato dopo aver scollegato il tubicino dal beccuccio anatomico. Per pulire l'imboccatura, scollegarla dal tubicino. Successivamente, lavare le parti in acqua tiepida, disinfettarle con del liquido disinfettante e lasciarle asciugare. Disinfettante consigliato: Disinfettante Chicco. Il dispositivo dovrebbe essere conservato in un luogo chiuso, lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore.

4. Ambiente – L'aspiratore nasale manuale Nosiboo ECO non pone alcun rischio ambientale, per questo può essere gestito come rifiuto domestico.

5. Specifiche

Peso (con confezione): 105 g

Dimensioni (unità confezionata L x A x P) 200 x 200 x 50 mm

Ciclo di vita previsto: 3 mesi