


nosiboo^{*}pro[®]

electric nasal aspirator

- EST KASUTUSJUHEND
- FIN KÄYTTÖOPAS
- LAV LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
- LIT NAUDOTOJO VADOVAS

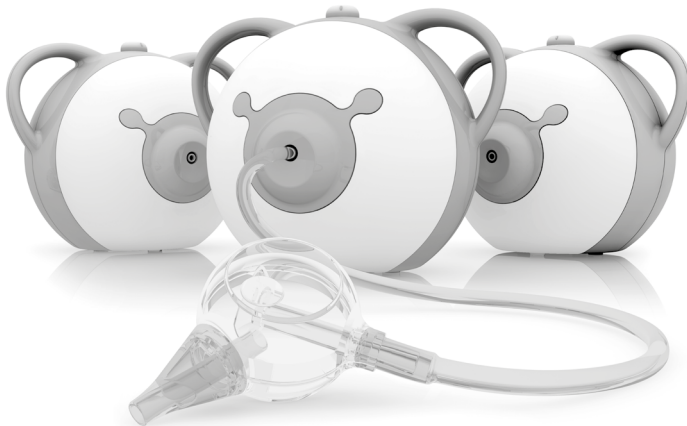

reddot award 2014
winner




KIDS
DESIGN
AWARD



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2016



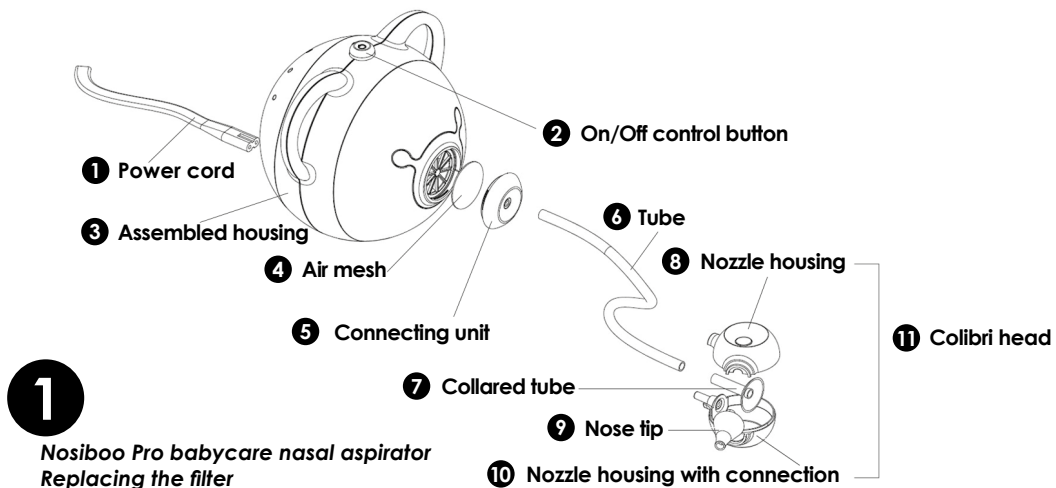


EST 1. Toitejuhe 2. Sisse/Väljalülitamise nupp 3. Koondatud kaitseümbris 4. Vahetatav filter 5. Conector costal 6. Toru 7. Kaelusega toru 8. Otsiku katiseümbris 9. Otsik 10. Otsiku katiseümbris koos ühendusega 11. Colibri otsik

FIN 1. Virtajohto 2. Virtanappi 3. Koottava kotelo 4. Filtreri 5. Liitännätöosa 6. Letku 7. Putki 8. Suutinkotelo 9. Suuttimen päätyosa 10. Suutinkotelo liitännällä 11. Colibri kärkiosa

LAV 1. Stravas vads 2. Ieslegsanas/izlégsanas poga 3. Samontéts korpuss 4. Maináms filtrs 5. Korpusa puses savienojosa detala 6. Caurule 7. Mansetcaurule 8. Snipja korpuss 9. Snipja gals 10. Snipja korpuss ar savienojumu 11. Colibri uzgalis

LIT 1. Maitinimo laidas 2. Ijungimo / išjungimo valdymo mygtukas 3. Surinktas korpusas 4. Filtras 5. Prijungimo elementas 6. Vamzdelis 7. Žiedinis vamzdelis 8. Antgalio korpusas 9. Antgalis 10. Antgalio korpusas su jungtimi 11. „Colibri“ galvutė

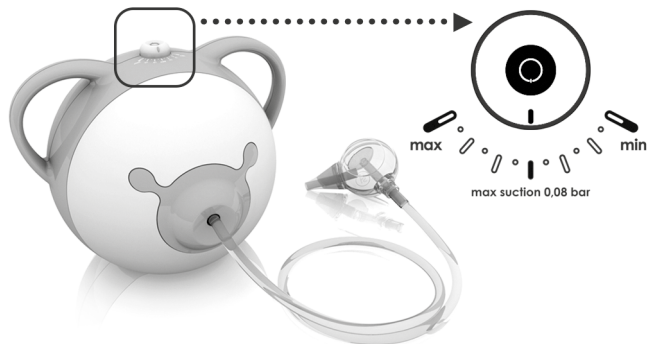

imemisvõimsuse reguleerimine
 imutehon säädaminen
 suksanas jaudas regulesana
 siurbimo galios reguliavimas

3

õige Colibri otsiku asend
Colibri kärkiosan oikea asento
pareiza Colibri uzgala pziocesana
tinkamos „Colibri“ galvutēs padēties nustatymas

Soovitav kasutusaeg on 10 sekundit ūhes ninaõõres.
Imun soovietu kesto on 10 sekundia/sierain.
Ieteicamais aspiršanas ilgums ir 10 sekundes katra nasi.
Rekomenduojava siurbimo trukmē yra 10 sekundžiu
vienoje nosies angoje.




4

Colibri otsiku puhastamine
Colibri kärkiosan puhdistaminen
Colibri uzgaja tirsana
Colibri galvutēs valymas

1. Išardomas „Colibri“ korpusas * Lah-
tikāiv Colibri kaitseūmbris * Koottava
Colibrin kärkiosa * Izjaucams Colibri
uzgalis

2. Ārakāiv paindūv otsik * Irroiettava
joustava pātyyosa * Noņemams,
elastīgs uzgalis * Nuimamas lankstus
antgalis

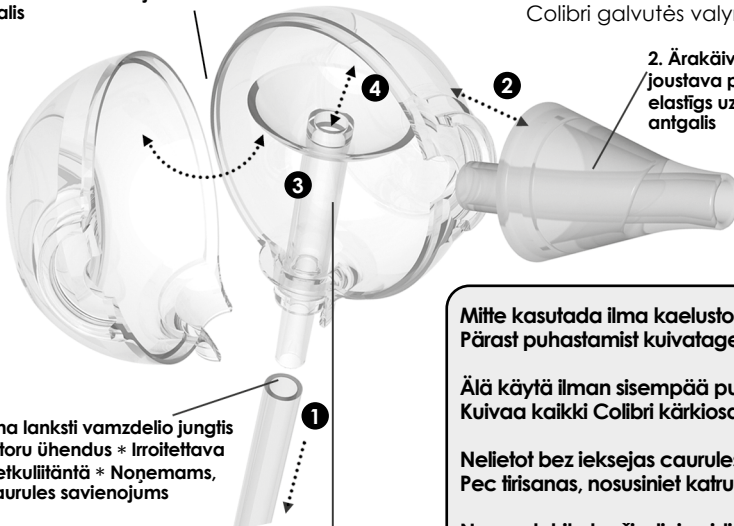

3. Nuimama lanksti vamzdelio jungtis
* Ārakāiv toru ūhendus * Irroiettava
joustava letkuliitāntā * Noņemams,
elastīgs caurules savienojums

4. Kaelusega toru * Putki
* Caurule ar paplašinātu
galu * Žiedinis vamzdelis

Mitte kasutada ilma kaelustoruta!
Pārst puhastamist kuivatage kōik Colibri otsiku osad.

Ālā kāytā ilman sisempāā putkea!
Kuivaa kaikki Colibri kärkiosan osat pesun jälkeen.

Nelietot bez ieksejas caurules!
Pec tirsanas, nosusiniet katru Colibri galvinas dalu.

Nenaudokite be žiedinio vidinio vamzdelio!
Nuvalę, kiekvieną „Colibri“ galvutės dalį nusauskinkite.

KASUTUSJUHE

Nosiboo Pro ninaaspiraator

Sisukord

Pakendi sisu	4
Eesõna	4
Hoiatus ja ohutus	4
Olulised ohutusnõuded	5
1. Kasutamine	6
2. Toote tutvustus	7
3. Esmased tegevused	7
4. Juhised kasutamiseks	7
5. Talitushäirete veaotsing	9
6. Hooldus ja hoidmine	12
7. Puhastamine	12
8. Oluline informatsioon elektromagneetiliste häirete vähendamiseks	13
9. Keskkond	13
10. Tehnilised andmed	13
11. Tarvikud, varuosad	13

NOSIBOO PRO ON MEDITSIINILINE SEADE.

Voite esitada noude vaid juhul, kui Te ei ole kasutanud Colibri otsikuid ja otsiku kaitsekile on eemaldamata.

Suunist ja kohaldatavad õigusaktid: Euroopa Parlamendi ja Komisjoni direktiiv 2011/83/EU § 16 (e) Austria Vabariik: FAGG: § 18 (1) 5
Ungari: 45/2014. (II. 26.) valitsuse dekreet § 29 (1) (e)
Registreerige oma seade ja me saadame teile kingiks allahindluskupongi. Kupongi saate kätte Nosiboo Pro veebipoest:
www.nosiboo.eu/product_registration

Pakendi sisu

* Colibri otsik * Toitejuhe * Kasutusjuhend * SeadeToru * Vahetatav ninaotsik * Eemaldatav varuotsik * Quick Guide

Eesõna

Lugupeetud klient,

Me tahame Teid õnnitleda KSCI, Ret Dot, German Design ja PTPA disainiauhinnaga pärjatud Nosiboo Pro ninaaspiraatori soetamise eest! Palun lugege antud kasutusjuhend hoolikalt läbi, et oleksite võimelised kasutama ninaaspiraatorit aastaid ja ennetada mitmeid vaevasi.



Palun lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi enne seadme kasutamist!

Attract Kft. on ISO 13485 sertifikaadiga meditsiiniseadmete tootja. Toode on MDD Legacy Device.

Actor EUDAMED No.: HU-MF-000004252

Hoiatus ja ohutus

Te võite näha järgmiseid märke kasutusjuhendil või seadme peal:



TOODETUD: ATTRACT KFT.
7622 Pécs, Siklósi út 1/1 – Ungari

T +36 72 551 642 customerservice@nosiboo.com
www.nosiboo.eu

DMR-07/A05/2/V10 * Kehtib alates: 01. 04. 2022 * **Lehekülg: 4/52**

Selgitus



• BF tüüpi osad (suurendatud kaitse elektrilöögi vastu)

REF

• Viide (tellimuse number)



• Hoiatus!



• II klassi seade (topelt isolatsioon)

SN

• Seerianumber



• Ohhtikud jäätmed



• IIa klassi meditsiiniseade

GTIN

• GTIN - Globaalne kaubaartikli number (UDI-DI)



• Tootja nimi ja address

LOT

• Partii number (tootmise kood)



• Lugege kasutusjuhendit

IP21

• Kaitstud esemete eest, mis on suuremad kui 12,5 mm ja vertikaalselt langevate veeepis-kade eest.



• Ainult koduseks kasutamiseks



• Hoia kuiv !

EST

Olulised ohutusnõuded



Hoiatus: Enne seadme kasutamist veenduge, et seadme kasutamine ei põhjusta mingit ohtu. Kui ohhtlike situatsioonide tekkimine ei ole ära hoitud võib kasutaja saada viga või isegi surma.

Ohutusnõuded üldiseks kasutamiseks

- * Seade on loodud ainult eemaldamiseks limaskestadele ninast. Seda ei tohi kasutada ühelgi teisel eesmärgil!
- * KEELATUD on kasutada seadet vannitoas või mõnes muus niiskes või müras keskkonnas.
- * Ärge kasutage seadet kui vedelik on sattunud kaitseümbrisesse. Võtke ühendust ametliku hoolduskeskusega.
- * Seadet tohivad kasutada ainult täiskasvanud.
- * Seadme kasutamisel peab see olema stabiilses asendis, seisma tasasel pinnal.
- * Ärge asetage last selli ega vajutage ühte ninasõõret kinni seadme kasutamise ajal!
- * Ärge jätke seadet tähelepanuta laste või teovõimetute isikute läheduses !
- * Ärge jätke seadet tähelepanuta suurte loomade (koerad, kassid) läheduses, kes võivad selle ümber ajada!
- * Toitejuhe võib kergesti minna ümber lapse kaela!
- * Seadet ei tohi kasutada hapnikurikkas keskkonnas! (kliinilistes oludes)
- * Ennetamiseks ülekasutamist ja lastele ohutust lülitab seade ennast automaatselt välja pärast 15 minutit. Pärast välja lülitumist saab seadet uuesti käivitada. Ülekuumenemisel on seade taaskord kasutusvalmis umbes 50 minuti pärast. Täpsemaks informatsiooniks palun ugege kasutusjuhendi 4. peatükki.
- * Olge kindel, et kõik seadme osad on korralikult kinnitatud enne seadme kasutamist!
- * Pärast puhastamist kontrollige üle kas olete kaelusega toru kinnitanud Colibri otsiku külge.
- * Ärge kasutage Colibri otsikut ilma kaelustoruta.
- * Ärge kasutage seadet ilma filtrita.
- * Ärge kasutage füsioloogilist lahust rohkem kui 5ml, sest selle sattumine toru võib kahjustada seadet.
- * Colibri otsikut tuleb suunata kasutamisel alla poole.

- * Ärge kasutage seadet kui lima või füsioloogiline lahus satub torru. Eraldage seade vooluvõrgust, tühjendage Colibri pea, puhastage ning kuivatage Colibri otsik ja toru. Kontrollige filtrit ning asendage see kui filter on märg või ummistunud.
- * Veenduge, et seadme kaitseümbris, toru ja Colibri otsik ei ole kahjustunud või mõranenud! Ärge kasutage seadet kui näete, et see on kahjustunud! Asendage kahjustunud osad! (Nimekiri vahetatavatest osadest leiate punktis „ Tarvikud, varuosad“).
- * Kui pärast seadme kasutamist ilmneb ärritus või punetus, siis ärge kasutage seda enam enne arstiga konsulteerimist.
- * Kasutage seadet ainult koos tootjapoolt antud toru ning Colibri otsikuga.
- * Ärge kasutage Colibri otsikut teistel seadmetel.

Ohutusnõuded seadme ühendamisel vooluvõrku

- * Kaitske toitejuhet kahjustuste eest! Ärge murdke seda, ärge asetage sellele raskeid esemeid, kuna kahjustunud toitejuhe võib põhjustada elektrilöögi.
- * Hoidke toitejuhet eemal sooja kiirgavatest asjadest (näiteks ahi, kuumapuhur ja radiatuur) kuna see võib kahjustada isolatsiooni.
- * Kasutage seadet ainult juhul kui toru on kuiv.
- * Ärge eemaldegaga seadme kinnituskruve. Ärge võtke seadet lahti ühelgi eesmärgil.
- * Seadet on keelatud kasutada juhul kui korpus on murdunud, pragunenud või toitejuhet on väärdkasutatud.
- * Ootamatu rikke või tõrke korral lülitage seade välja ning võtke see koheselt vooluvõrgust.

Ohutusnõuded seadme järgmiseks kasutamiseks

- * Alati desinfitseerige Colibri otsikut pärast kasutamist!
- * Ärge jätke Colibri otsikut ja eemaldatavaid osi laste kättesaadavusse, kuna nad võivad neid alla neelata.

Üldised ettevaatusabinõud

- * Lugege ning järgige juhiseid peatükis „Oluline informatsioon elektromagneetiliste häirete vähendamiseks“.
- * Lugege ning järgige juhiseid peatükis „Keskfond“ juhul kui soovite ära visata seadet või mõnda selle osa.

1. Kasutamine

Nosiboo Pro ninaaspiraator on disainitud eemaldamaks lima laste ninast.

Vaakum ja õhuliikumine, mis on aspireerimiseks vajalik, tekib tänu aspireerivale seadmele, mis on spetsiaalselt selleks loodud. Colibri otsik, mida asetatakse ninna on ühendatud läbi juhtme seadmega. Colibri otsik on patenteeritud disainiga, mis takistab lima sattumist seadmesse.

Kasutamise eesmärk:

- * Tagada imiku ninakaudne hingamine
- * Vältimaks lapse külmetushaigustest tingitud tühistusi ja kiirendada paranemisprotsessi.
- * Leevendada laste allergiasümpptomeid- eemaldades lima ninast.

Sihtrühm:

- * Lapsed (enamasti alla 6-aastased), kes ei suuda iseseisvalt korralikult nina nuusata

Haigused ja vaevused, mis nõuavad ravi (tundemärgid):

- * eemaldamaks ummistuse ninast
- * tavalise külmetuse ravi ja ninas tekkinud põletike ravimise abivahend
- * täiendav ravi allergia puhul.

Tingimused, mille korral seadet ei tohiks kasutada (vastunäidustatud):

- * Hemofiilia
- * Kui veresooned nina vaheseinas on pinnapealsed, suurel- põhjustab sagedasti ninaverejooksu
- * Võttes verevedeldajat
- * Kaasasündinud vääraarengu korral (näiteks suulae lõhe korral).

Seadme kasutaja:

- * Vanus: täiskasvanud üle 18a
- * Sugu: pole oluline (mees või naine)
- * Teadmised: peaks omama teadmisi vastavalt oma eale
- * Haridustase: minimaalselt algharidusega, seadme kasutamine ei vaja eriteadmisi
- * Oluline: kasutusjuhend on tootega kaasas

2. Toote tutvustus

Joonis 1 – Nosiboo Pro ninaaspiraator

EST

3. Esmane kasutamiskord

Colibri otsiku kokku panemine

1. Puhastage Colibri otsik (vaata peatükke „Puhastamine” ja „Hooldus ja hoidmine”).
2. Ühendage kaelusega toru ühenduskohast kaitseümbrisega
3. Asetage kaitseümbrise teine pool õigesse asendisse
4. Vajutage kaitseümbrise kaks osa kokku ühenduskoha pealt.
5. Ühendage toru üks ots Colibri otsikuga

Seadme ühendamine

6. Veenduge, et ühendusseadmete taga olev filter on omal kohal.
7. Ühendge teine pool torust seadmega.
8. Ühendage toitejuhtme üks osas seadme külge ning teine osa pistikupessa.

Seade on kasutamiseks valmis.

4. Juhised kasutamiseks

Enne seadme kasutamist tuleks seade asetada nii, et oleks võimalik kiiresti ning lihtsalt toitejuhe pistikupesast välja tõmmata. Seade on võimalik sisse ja välja lülitada vajutades seadme peal olevat nuppu, sama nuppu keerates paremale või vasakule on võimalik reguleerida imemisvõimsust. Seadme reguleeritavus garanteerib, et lapsevanem ei saa põhjustada lapse ninale imemisvõimusest tulenevalt kahjustusi. Enne seadme sisselülitamist valige sobiv imemisvõimsus lähtudes lapse vanusest. Vaadake allolevalt jooniselt.

Joonis 2 – Imemisvõimsuse reguleerimine

Minimaalne imemisvõimsus on sobilik vastsündinutele, keskmine võimsus beebidele ja maksimaalne võimsus väikestele lastele ning koolieelikutele. Seadme imemisefektiivsus on suuresti sõltuv lima paksusest, haiguse ulatusest ning lapse anatoomiast. Vedela lima korral võib kasutada madalamat imemisvõimsust ning kui lima on paks, siis võib kasutada tavapärasest suuremat imemisvõimsust.

Seadet tohivad kasutada ainult täiskasvanud. Ärge andke seadet kasutamiseks lapse kätte!

Seadme kasutamisel tuleb last hoida sirgelt. Võtke laps sülele või pange ta istuma sirgesse asendisse padi selja taha. Võib ka istuda toolis taha kallutatult.



Ärge pange last selili ega blokeerige seadme kasutamise ajal ühte ninasõõret.
Veenduge, et seadme taga olev ventilatsiooniaava on vaba!
Hoiatus! Kuum õhk võib väljuda seadme ventilatsiooniaavade kaudu!

Asetage eelnevalt desinfitseeritud Colibri otsik lapse ninasõõrde ja seejärel vajutage seade nupust tööle (seade töötab imemisvõimsusel, mida viimati kasutati, vajadusel reguleerige seda).

Joonis 3 – Õige Colibri otsiku asend

Pange Colibri otsik lapse ninna. Otsik tuleb panna ninna suunaga õrnalt alla ning silma välisnurga poole. Selles asendis saab otsikut kergesti liigutada ja ei tee haiget.

Harvadel juhtudel võib tekkida olukord, kus vastsündinu ninasõõrmed on liiga väikesed, et ninaotsik mahuks sõõrmesse sisse. Sellisel juhul asetage ninaotsiku ava vastu ninasõõret nii, et sõõre on täielikult kaetud. Aspiraatori imemisvõimsus on piisavalt tugev, et puhastada ninakäigud sel viisil.

Kaitseümbrise ühenduse osast peaks toru olema suunatud allapoole.

Patendeeritud disainiga Colibri otsik mahutab 5 ml vedelikku ja takistab lima sisenemist toru.

Kuiva või paksu lima korral tuleks eelnevalt kasutada füsioloogilist lahust. Ärge kasutage rohkem kui 5ml korraga, kuna vedeliku sattumine toru võib seadet kahjustada!

Pärast füsioloogilise lahuse kasutamist oodake paar minutit ning eemaldage välja tulnud sekreet. Alles seejärel kasutage ninaaspiraatorit.

Ninatilku ning teisi arsti poolt väljakirjutatud medikamente tuleks kasutada pärast nina puhastamist aspiraatoriga!

Soovitatav kasutsaeg on 10 sekundit ühes ninasõõres.

Kui te peate aspireerimisega katkestama, siis lülitage seade välja. Kui seade on täielikult välja lülitunud, siis saate selle taaskäivitada. Seade lülitub välja 15 minuti pärast, kuid seda saab taaskäivitada. Seadme ülekasutamisel või piisava ventilatsiooni puudumisel lülitub see turvalisuse huvides välja umbes 50 minutiks.



Ärge kasutage ninaaspiraatorit nina pesemiseks!

Nosiboo Pro ninaaspiraatorit saab kasutada mitmeid kordi päevas. Soovitav on kasutada seadet enne magamaminekut ja söömist, et tagada lapse rahulik hingamine.

Ärge põhjustage lapsele valu; tutvustage seadet ja kasutamismeetodit lapsele tolerantsetl.

Alati pärast kasutamist lülitage seade nupust välja.

Pärast seadme välja lülitamist võib mootor veel mõnda aega töötada kuni seade on maha jahtunud.

Ärge eemaldage seadet pistikupesast enne kui seade on täielikult välja lülitunud!

Ärge katke seadme taga asuvaid ventilatsioonivahendid seadme kasutamise ajal!

Eemaldage toitejuhe pistikupesast, kui seade on täielikult välja lülitunud ja jahutusfaas on lõppenud.

Soovitav võimsuse vahemik:

- * 0,04 – 0,08 bar. Kasutage väiksemat võimsust vastsündinute puhul ning suuremat võimsust 4-aastaste ja vanemate laste puhul.
- * Imemisvõimsus sõltub palju lima paksusest ning haiguse ulatusest

5. Talitushäirete veaotsing

Kui te kahtlustate Nosiboo Pro seadme riket, siis palun lugege järgmist kahte peatükki. Veaotsing pakub välja lahendusi konkreetsete probleemide lahendamiseks. Järgnevas tabelist leiate erinevate probleemide loetelu ning nende lahendamise soovitused. Kui need soovitused ei võimalda probleemi lahendada, aitab peatükk Tõrgete korral tegutsemise teil/kaupmehel/edasimüüjal rikke põhjuse võimalikult kiiresti tuvastada. Rikke korral lugege need peatükid hoolikalt läbi.

Tootja ei vastuta volitamata maaletoojalt pärit toodete rikete eest!

Veaotsing

Rike	Põhjus	Soovitused
Seadet ei saa sisse lülitada.	Pistik ei ole ühendatud.	Ühenda toitejuhe seadmega ning seejärel 230V pistikupesassa.
Seadet ei saa sisse lülitada.	Seade lülitus välja turvalisuse huvides liigse tarvitamise tõttu.	Oma lapse turvalisuse nimel lõpetage ninaaspiraatori kasutamine. Seadet saab jälle kasutada umbes 50 minuti pärast.
Imemisvõimsus väheneb.	Colibri otsik on ummistunud või põlnud korralikult paigaldatud.	Võtke see osadeks ja puhastage. Kokkupanemise juhend kasutusjuhendis.
Imemisvõimsus väheneb.	Filter on ummistunud.	Vaheta filter tuginedes kasutusjuhendi peatükile „Hooldus ja hoidmine“.
Vedelik või lima läheb torusse.	Colibri otsikut ei hoitud õiges asendis. Liitumispunkti ei hoitud toru suunaga alla.	Lülitage seade välja, puhastage ning kuivatage Colibri otsik ja toru. Kontrollige filtrit ning vajaduse vaheta see.
Vedelik või lima läheb torusse.	Kasutati liiga palju soolalahust.	Vähendage soolalahust kogumispeas, et seda oleks vähem kui 5ml. Lülitage seade välja, puhastage ning kuivatage Colibri otsik ja toru. Kontrollige filtrit ning vajaduse vaheta see.

Kui seade ei tööta korralikult vaatamata täidetud juhiste peatükis „Veaoetsing“, võtke ühendust toote maaletoojaga.

Tärgete korral tegutsemine

Garantii kehtib 24 kuud pärast toote ostmist. Kehtib ainult kui toodet on kasutatud sihipäraselt ning ei esine väliseid kahjustusi. Järgnevalt on vajalik kindlaks teha talitlushäire ning kas see tekkis kasutaja enda vea tõttu või mitte. Edasist kontrolli võib läbi viia kasutaja oma kodus või koos toote müüjaga või usaldusisikuga peale garantii dokumentide ja ostuõhki esitamist. Kui toote sihipärasel kasutamisel peaks ilmnenud rike, siis garantii korras see asendatakse. Toote väljastaja või vigadega tegelev ametnik on kohustatud täitma garantiidokumendi, panema detailseid kirja iga veaoetsingu ning edastama need 24 tunni jooksul seadme tootjale.

Veaotsing

Täpne kirjeldus

Garantii ülesanded

Visuaalne kontroll

Seadme põhjal olev märgistus peab olema kahjustamata.

Kahjustuse märgid seadme ümbrise aval.

Seadme väärkasutamisel asendusgarantii ei kehti.

Muud nähtavad kahjustused ümbrisel, kriimustused, kõrgendikud kruvide ümber.

Kahjustuse märgid seadme ümbrise aval.

Seadme väärkasutamisel asendusgarantii ei kehti.

Filtri peal ja ümber olev saastatus. Filtri kahjustus, feralisus seadmes või jäljed, et terasid on sattunud seadmesse.

Üleiligne filtri saastumine või seadme sisse sattuv mustus viitavad seadme väärkasutamisele.

Seadme väärkasutamisel asendusgarantii ei kehti.

Igasugune toru saastatus.

Vooliku saastumine seestpoolt viitab seadme väärkasutamisele.

Seadme väärkasutamisel asendusgarantii ei kehti.

Manuaalne kontroll

Enne seadme kasutamist, palun kontrollige toitejuhtme ühenduvust seadmega.

Kui seadme kinnitusi on võimalik liigutada ja eemaldada, siis on seadme sisse lülitamine ja selle kasutamine eluohhtlik. Selline viga on tekkinud välise mõju tõttu ega kuulu garantii alla.

Seadme väärkasutamisel asendusgarantii ei kehti.

Mistahes veateade juhtnupul.

Kui seadme sisse/välja lülitamise nupp on kahjustunud, ummistunud, liigub vabalt või kukub ära, siis antud rike on tingitud välisest mõjutusest ning ei kuulu garantii alla. Seadme sisse lülitamine ja selle kasutamine on eluohhtlik!

Seadme väärkasutamisel asendusgarantii ei kehti.

Sisselülitamine

Seadme töölepanek toimub tänu juhtmele, mis on seadmega kaasas.

Kui seade ei hakka nendel tingimustel korrektselt tööle, siis on soovitatav juhtme vahetamine. Sellised vead on tekkinud välisest mõjude tõttu ega kuulu garantii alla.

Seadme väärkasutamisel asendusgarantii ei kehti.

Seadme töölepanek on võimalik, aga peale selle töölepanekut esineb seadmel irregulaarsust.

Kui seadet kasutades esineb ebatavalisi nähtusi, näiteks madal imemisjõud, suitsu väljumine seadmest, tugev lõhn, seade põriseb või paugub kõvasti, väriseb, on lühises, seadet ei saa reguleerida nupu abil ja seade ei lülitu 1,5 min jooksul välja.

Kui esineb ebatavalisi nähtusi ja seadmel ei ole füüsilisi kahjustusi, siis on võimalik saada garantii uus seade. Asendus toimub turustaja kaudu ja kulud katab tootja.

Garantii ülesanded

Nosiboo Pro turustaja on kohustatud kohe sellel tegelema klientide kaebustega, mis on seotud aspektidega, mis on välja toodud peatükkides Veoatsing ja ja Tõrgete korral tegutsemine. Edasimüüja peab registreerima kõik tõrkeotsingud. Seda saab teha edasimüüja dokumentatsioonis või kliendi juhendiga kaasas olevates garantii paberites. Kirja peab panema rikke, kuupäeva ja unikaalse seerianumbriga, mis on leitav seadme põhjal alt.

Hoolduskeskus:

Attract Kft.
H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 - Ungari
Tel.: +36 72 551 642 (esmaspäevast reedeni: 8:00-16:00)
E-mail: customerservice@nosiboo.com

6. Hooldus ja hoidmine

Kui seadme jahutusprotsess on lõpetanud tegevuse, võib toitejuhtme pistikupesast välja võtta. Ühendage toru seadme küljest lahti, samuti Colibri otsik. Kaitseümbrise sees on spetsiaalne filter, mida tuleks vahetada umbes 300 kasutamise järel või 1 aasta pärast intensiivset kasutamist. Harvemal seadme kasutamisel saab filtrit kauem kasutada. Seadmes kasutatava filtri number on AC-04-01.

Joonis 1 – Filtri vahetamine

Puhastage korpust kuiva, pehme riidega; ärge kasutage ühtegi ainet ega kemikaali!

Hoidke seadet suletud kohas, kus see on kaitstud tolmu ja kahjustumise eest (näiteks kapis).

Kui Teil on rohkem lapsi, siis soovitame kasutada eraldi Colibri otsikut igale lapsele. Hoiustage Colibri otsikuid eraldi.

Ärge hoiustage seadet küttekeha läheduses!

7. Puhastamine

1. Eemaldage toru ja otsik ning võtke otsiku kaitseümbris lahti.
2. Peske kaelusega toru, otsik ja otsiku kaitseümbris leige veega ja nõudepesuvahendiga puhtaks ning laske neil seejärel kuivada.

Joonis 4 – Colibri otsiku puhastamine

3. Puhastage kaitseümbris kuiva pehme lapiga; ärge kasutage vedelikke, puhastusvahendeid ega kemikaale.
4. Vajadusel pühkige toru lapi abil puhtaks. Ärge peske toru.

8. Oluline informatsioon elektromagneetiliste häirete vähendamiseks

Kodune wifi leviala, mobiiltelefonid nign teised seadmed võivad avaldada mõju seadmele tekkiva elektromagnethäirete tõttu. Elektromagnetvälja tekkimisel võib see kahjustada seadet.

Tulenevalt ülal toodud põhjustest ei tohi meditsiiniseadet häirida teiste seadmetega.

Elektromagnetilise sobivuse tagamise nõuded on välja toodud standardites. Standardid määratlevad seadme kaitse taseme ja maksimaalse radiomagnetilise kiirguse eraldumise taseme.

Nosiboo Pro ninaaspiraator vastab EN 60601-1-2:2007 nõuetele. Vaatamata sellele tuleks jälgida järgmised juhised seadme kasutamisel:

- * Ärge kasutage telefoni ega muid seadmeid, mis kiirgavad elektromagnetkiirgust antud seadme läheduses! Vastasel juhul võib see kahjustada seadme töötamist.
- * Soovitav on hoida seadmetel vahet vähemalt 5 meetrit !

9. Keskkond

Ärge visake seadet pärast kasutusea lõppu olmejäätmete hulka, kuna elektroonilised seadmed kuuluvad ohtlike jäätmete hulka. Seda näitab järgmine märk toote pakendil:



Colibri otsik ei hõlma endas keskkonnanariske, mistõttu võib selle ära visata olmejäätmete hulka.

10. Tehnilised andmed

Reguleeritav seadme võimsus: 200-390 W
 Differentiaalrõhk: 0.04-0.08 baar
 Maksimaalne õhu liikumine: 54 l/min
 Toiteväärtus: 230 V 50-60 Hz
 IP klass: IP21
 Kaitse klass: II
 Osade tüüp: BF
 Kaasas olevad osad: terve kaitseümbris
 Operatsiooni tüüp: pidev operatsioon puudub
 Termilise lüliti temperatuur: 95 °C
 Katkematu kasutamise pikkus: maksimum 15 minutiks
 Müratase: max. 70 dB

Kasutus pikkus: 15 minut/ aparaat on välja lülitatud 50 minutiks
 Keskmine seadme temperatuur: 30-35 °C pärast 1 minutit seadme kasutamist
 Temperatuur: -10 °C... +40 °C
 Suhteline õhuniiskus: max. 75%
 Oodatav seadme (elektrilise osa) kasutusiga: 3 aastat
 Oodatav Colibri otsiku kasutusiga: 3 kuud
 Colibri otsa ninasse käiva osa diameeter: miinimum 5.6 mm
 Colibri otsa ninasse käiva osa pikkus: miinimum 32 mm.
 Kaal: 972g
 Mõõdud: 200 x 155 x 175mm
 Mõõdud koos pakendiga: 180 x 180 x 225 mm

Tarvikud, varuosad

Nosiboo Pro Accessory Set:

Tarvikute komplekt, kuhu kuuluvad Nosiboo Pro varuosad
<https://shop.nosiboo.eu/>



ACS-01-01 sinine

- * 1 Colibri-pea
- * 2 otsakud
- * 1 toru
- * 1 filter
- * 1 harja



ACS-01-02 roosa

- * 1 Colibri-pea
- * 2 otsakud
- * 1 toru
- * 1 filter
- * 1 harja



ACS-01-03 roheline

- * 1 Colibri-pea
- * 2 otsakud
- * 1 toru
- * 1 filter
- * 1 harja

Varuosi saab telida ametlikust hoolduskeskusest:

Attract Kft. H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 - Ungari Tel.: +36 72 551 642 (esmaspäevast reedeni: 8:00-16:00)
E-mail: customerservice@nosiboo.com



Toitejuhe EU
NO-01-022-A6-0WE1



Toitejuhe UK
NO-01-022-A6-0WM3



Ühendusseade
NO-01-050-H2-7BXX * sinine
NO-01-050-H2-7PXX * roosa
NO-01-050-H2-7GXX * roheline

Rahvusvaheline garantiikaart

Garantii kehtib 24 kuud pärast toote ostmist. Kehtib ainult kui toodet on kasutatud shippäraselt ning ei esine väliseid kahjustusi. Garantii kehtib volitatud ametlike edasimüüjate kaudu (esitada tuleb edasimüüja originaalarve). Nosiboo Pro turustajad on kohustatud tegema klientide kaebustega põhinevas aspektidele, mis on välja toodud peatükis Talitushäirete veaotsing ja Rikete juhend. Garantii tingimustele vastates vahetatakse seade viivitamatult välja. Turustaja on kohustatud tegema kirjalikke märkmeid igast veaotsingust. Seda on võimalik teha turustaja dokumentatsioonis või kasutaja garantii paberites, mis on kasutusjuhendiga kaasas. See peab sisaldama rikke kirjeldust, kuupäeva ja unikaalset seerianumbrit, mille leiab seadme alt.

Täidab edasimüüja

Edasimüüja nimi ja aadress:

Nosiboo Pro ninaaspiraatori seerianumber:
(leiab seadme all olevalt sedelilt)

Ostu kuupäev:

Rikke tüüp:

Rikke kuupäev:

Edasimüüja allkiri:
(kuupäev, allkiri ja tempel)

Täidab hooldusfirma

Kättesaamise kuupäev:

Hoolduse läbinud osad:

Uus seerianumber:

Tagasisaatmise kuupäev:

Kinnitatud allkiri ja pitsat
Väljavahetatud osadele kehtib garantii 12 kuud.

Täidab edasimüüja

Edasimüüja nimi ja aadress:

Nosiboo Pro ninaaspiraatori seerianumber:
(leiab seadme all olevalt sedelilt)

Ostu kuupäev:

Rikke tüüp:

Rikke kuupäev:

Edasimüüja allkiri:
(kuupäev, allkiri ja tempel)

Täidab hooldusfirma

Kättesaamise kuupäev:

Hoolduse läbinud osad:

Uus seerianumber:

Tagasisaatmise kuupäev:

Kinnitatud allkiri ja pitsat
Väljavahetatud osadele kehtib garantii 12 kuud.

Lubatud garantii ei mõjuta oludest tulenevaid kasutaja garantiioigusi.

Nosiboo pro on meditsiiniline seade. Võite esitada nõude vaid juhul, kui Te ei ole kasutanud Colibri otsikut ja otsiku kaitsekile on eemaldamata. Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Võib juhtuda, et asendusseadmel on teistsugused tehnilised omadused. Suunised ja kohaldatavad õigusaktid: Euroopa Parlamendi ja Komisjoni direktiiv 2011/83/EU § 16 (e) Austria Vabariik: FAGG: § 18 (1) 5 Ungari: 45/2014. (II. 26.) valitsuse dekreet § 29 (1) (e).

Tehas ja hoolduskeskus: Attract Kft. Ungari, H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 Tel: +36 72 551 642 (esmaspäevast reedeni: 8:00-16:00)

E-mail: customerservice@nosiboo.com

KÄYTTÖOPAS

Nosiboo Pro-nenänniistäjä

Sisällysluettelo

Pakkaus sisältää	16
Alkusanat	16
Varoitukset ja turvallisuusohjeet	16
Tärkeät turvallisuusohjeet	17
1. Käyttötarkoitus	18
2. Tuote-esittely	19
3. Ennen käyttöä	19
4. Käyttöohjeet	19
5. Toimintahäiriöiden vianmääritys	21
6. Huolto ja säilytys	24
7. Puhdistaminen	24
8. Tärkeää tietoa sähkömagneettisten häiriöiden vähentämiseen liittyen	25
9. Ympäristö	25
10. Tuoteseloste	25
11. Lisätarvikkeet, varaosat	25

NOSIBOO PRO ON HYGIEENI- NEN LÄÄKINTÄLAITE

Voit palauttaa tuotteen vain mikäli laitteen ja Colibri karkiosan muovipakkaukset ovat paikallaan!

Ohjaava ja sovellettava lainsäädäntö: Euroopan parlamentin ja komitean direktiivi 2011/83/EU § 16 (e) Itävallan Tasavallan FAGG: § 18 (1) 5 Unkari 45/2014. (II. 26.) Hallituksen asetus § 29 (1) (e)

Rekisteröi laitteesi ja lähetämme sinulle lahjaksi alennukseen oikeuttavan kupongin Voit lunastaa kupongin Nosiboo Pro valmistajan verkkokaupassa. www.nosiboo.eu/product_registration

Pakkaus sisältää

* Colibri karkiosan * Virtajohdon * Käyttöoppaan * Laitteen * Letkun * Irroitettavan päätyosan varaosan * Quick Guide

Alkusanat

Hyvä asiakas

Haluamme onnitella sinua KSCI, Red Dot Design-, German Design ja PTPA palkinnolla palkitun Nosiboo Pro nenänniistäjän ostamisen johdosta! Pyydämme sinua lukemaan nämä ohjeet huolellisesti voidaksesi käyttää nenänniistäjää vuosia ja ehkäistkäksi sairauksia pitkään.



Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa!

Attract Kft. on ISO 13485 -sertifioitu lääkkinnällisten laitteiden valmistaja. Tämä tuote on MDD Legacy Device.

Actor EUDAMED No.: HU-MF-000004252

Varoitukset ja turvamerkinnät

Nämä merkit voivat esiintyä käyttöoppaassa tai pakkauksen etiketillä.



VALMISTANUT: ATTRACT KFT.
7622 PECS, SKLŐSI ÚT/1 – Unkari

T +36 72 551 642 customerservice@nosiboo.com
www.nosiboo.eu

DMR-07/A05/2/V10 * Voimassa: 01. 04. 2022 * Sivu: 16/52

Selitys



• BF-tyyppin liittytösa (antaa lisäsuojan sähköiskuja vastaan)

REF

• Referenssi (tilausnumero)



• Varoitus!



• Luokan II sähkölaite (suojaeristetty)

SN

• Sarjanumero



• Vaarallinen jäte



• Luokan II a lääkinällinen laite

GTIN

• GTIN – globaali kaupanimikkeeseen numero (UDI-DI)



• Valmistajan nimi ja osoite

LOT

• Valmistuserän numero (tuotannon tunnistus)



• Lue käyttöopas

IP21

• Suojaus keskikokoisia kappaleita vastaan, halkaisija yli 12,5mm



• Vain kotikäyttöön



• Pidä laite kuivana!

FIN

Tärkeä turvallisuusohje



Varoitus: mikäli alla olevia mahdollisesti vaarallisia tilanteita ei pyritä välttämään, ne voivat johtaa hengenvaarallisiin onnettomuuksiin.

Yleiskäyttöön liittyvät turvallisuusohjeet

- * Laitetta tulee käyttää vain ilman poistamiseen lapsen nenästä. Laitetta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen.
- * Laitetta EI SAA käyttää kylpyhuoneessa tai muissa kosteissa filoissa!
- * Lopeta laitteen käyttö mikäli koteloon on päässyt jotain kosteaa tai kiinteää ainetta. Ota yhteyttä asiantuntijapalveluun.
- * Laite on tarkoitettu ainoastaan aikuisten käyttöön.
- * Laitteen tulee olla käytettäessä vakaassa asennossa tasaisella pinnalla.
- * Älä aseta lasta selälleen tai estä lasta hengittämästä nenän kautta laitetta käytettäessä.
- * Älä jätä laitetta vartioimattomana lasten tai henkilöiden, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on vähentynyt lähettyville.
- * Älä jätä laitetta ilman valvontaa isojen lemmikkieläinten (kissa, koira) lähettyville kaatumisvaaran vuoksi.
- * Virtajohto voi kiertyä helposti lapsen kaulan ympärille!
- * Laitetta ei saa käyttää paljon happea sisältävässä ympäristössä (kliiniset olosuhteet).
- * Liikakäytön ehkäisemiseksi ja lapsen turvallisuuden takaamiseksi laite sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua käynnistämisestä. Sammutuksen jälkeen laitteen voi käynnistää uudelleen. Laitteen ylikuumentuessa laitteen elektroniikka estää uudelleen käynnistämisen n.50 minuutiksi. Lisätietoja löytyy Käyttöoppaan Kappaleesta 4.
- * Varmista, että kaikki osat on kiinnitetty kunnolla ennen laitteen käyttöönottoa!
- * Ennen käyttöä tarkista, että olet kiinnittänyt (kuivan) putken Colibri kärkiosaan puhdistuksen jälkeen.
- * Älä käytä Colibri kärkiosaa ja laitetta ilman putkea.
- * Älä käytä laitetta ilman suodatinta.
- * Älä käytä suolaliuosta enemmän kuin 5 ml sillä liuoksen eksyminen putkeen voi vahingoittaa laitetta.
- * Colibri kärkiosan liittymäkohdan tulisi osoittaa käytön aikana alaspäin.
- * Lopeta laitteen käyttö mikäli ilmaa tai liuosta on päässyt putkeen, irrota laite verkkovirrasta ja tyhjennä Colibri kärkiosa ja puhdista ja kuivaa se ja putki, tarkista filtri ja vaihda se mikäli filtri on kastunut tai tukossa.

- * Varmista, että kotelo, putki ja Colibri kärkiosa eivät ole vaurioituneet tai haljenneet! Älä käytä laitetta mikäli huomaat vaurioita! Vainda vaurioituneet osat! (Lista varaosista löytyy osiosta „Lisätarvikkeet , varaosat“.)
- * Älä käytä laitetta mikäli lapsen nenään ilmestyy punaisuutta tai ihottumaa! Ota yhteyttä lääkäriin.
- * Käytä laitetta ainoastaan valmistajalta saamiasi Colibri kärkiosaa ja putkea!
- * Älä liitä Colibri kärkiosaa muihin laitteisiin.

Laitteen verkkovirtaan liittämiseen liittyvät turvallisuusohjeet.

- * Suojaa virtajohtoa vaurioitumiselta! Älä riko johtoa tai aseta sen päälle raskaita esineitä ,sillä vaurioitunut virtajohto voi johtaa sähköiskuun.
- * Pidä johto etäällä kuumuudesta (esim. takka, patterit) sillä kuumuus voi vaurioittaa sen eristystä.
- * Käytä laitetta vain kun putki ja Colibri kärkiosa ovat kuivia.
- * Älä irrota kotelon muttereita. Älä käytä laitteen osia muuhun tarkoitukseen.
- * Laitteen käyttö ei ole sallittua mikäli kotelossa tai virtajohdossa on vaurioita.
- * Yllättävän vian tai toimintahäiriön ilmetessä sammuta laite välittömästi ja irrota se verkkovirrasta.

Laitteen käyttöönnottoon liittyvät turvallisuusohjeet

- * Desinfioi Colibri kärkiosa aina käytön jälkeen!
- * Älä jätä irrotettuja Colibri kärkiosan osia lasten ulottuville tukehtumisvaaran vuoksi.

Yleiset varotoimenpiteet

- * Lue „Tärkeää tietoa sähkömagneettisten häiriöiden vähentämiseen liittyen“ ohjeet ja noudata niitä!
- * Lue ja noudata „Ympäristö“ kappaleen ohjeita mikäli aiot hävittää jonkin laitteeseen kuuluvan osan.

1. Tarkoituksenmukainen käyttö

Nosiboo Pro nenänniistäjä on suunniteltu poistamaan lapsen nenään kertynyttä limaa.

Imemiseen tarvittavan ilmvirtauksen ja imukyvyn mahdollistaa juuri tähän tarkoitukseen luotu imulaite. Nenään asetettava Colibri kärkiosa on yhdistetty laitteeseen putken välityksellä. Colibri kärkiosa on patentoitu malli ja se estää limaa kulkeutumasta laitteeseen.

Tarkoituksenmukainen käyttö:

- * taata nenän kautta hengittäminen imeväisillä
- * ehkäistä lapsuusiän flunssan jälkiseurauksia ja nopeuttaa parantumista imemällä nenästä limaa pois
- * helpottaa lapsuusiän allergioita imemällä nenästä limaa pois

Kenelle tuote on tarkoitettu:

- * lapsille (tavallisesti alle 6-vuotiaita) jotka eivät itse kykene niistämällä poistamaan nenään kertynyttä limaa

Sairaus; hoitoa vaativat tilat (oireet):

- * nenän tukkoisuuden hoito
- * flunssan hoitoon sekä apu hoitomenetelmänä poskiontelotulehduksen hoitoon
- * täydentävänä hoitona allergisiin tartuntatauteihin

Tilat joissa laitetta ei saa käyttää (vasta-aihe):

- * hemofilia
- * nenän väliseinän limakalvojen verisuonien laajentuma – toistuvan nenöverenvuodon vaara
- * verenhennuslääkkeiden käyttö
- * synnynnäinen epämuodostuma (esim. suolakihalkio)

Käyttäjäkohderyhmä:

- * Ikä : aikuinen yli 18-vuotta
- * Sukupuoli: ei oleellinen (mies tai nainen)
- * Tietämys: iän mukainen yleistietämys
- * Koulutus: vähintään peruskoulun käynyt, laitteen käyttöön ei vaadita erityistietämystä
- * Tärkeää: mukana tulleen Käyttöoppaan tietojen hallinta

2. Tuote-esittely

Kuva 1 – Nosiboo Pro nenänniistäjä

3. Ensimmäinen käyttökerta

Colibri kärkiosan asentaminen

1. Puhdista ja kuivaa Colibri kärkiosa (lue kappaleet „Puhdistaminen” ja „Huolto ja säilytys”)
2. Aseta putki liitäntäosalla varustettuun suutinkoteloon.
3. Aseta suutin jossa ei ole liitäntää paikalleen.
4. Työnnä joustava suuttimen päätyosa paikalleen
5. Liitä letku toinen pääty Colibri kärkiosaan.

Laitteen kytkeminen

6. Varmista, että liitäntäyksikön takana oleva suodatin on paikallaan.
7. Liitä letkun vapaa pääty laitteen koteloon
8. Liitä 230 V virtajohto koteloon ja toinen pääty pistorasiaan.

Laitte on valmis käytettäväksi

4. Käyttöohjeet

Laitteen tulisi olla käyttöön otettaessa asetettu niin, että virtajohto on helposti irroitettavissa pistorasiasta! Voit käynnistää tai sammuttaa laitteen painamalla laitteen kotelon päällä olevasta virtanapista. Samaa nappia kääntämällä voit säätää laitteen imutehoa. Säädettävyyttä takaa sopivan imutehon ja estää vanhempaa aiheuttamasta toissijaisia vaurioita lapsen nenässä. Ennen kuin käynnistät laitteen valitse sopiva imuteho lapsesi iän perusteella. Kuva 2 (Imutehon säätäminen)

Kuva 2 – Imutehon säätäminen

Pienin teho sopii vastasyntyneille, keskiteho vauvoille ja maksimiteho pienistä lapsista kouluikäisiin. Laitteen teho riippuu ilman paksuudesta, sairauden kestosta ja lapsen henkilökohtaisesta anatomista. Mikäli ilma on ohutta, voit käyttää laitteen pienintä tehoa, mikäli paksua, voit käyttää suurempaa tehoa kuin tavallisesti.

Ainoastaan aikuiset voivat säätää laitetta. Älä anna käyttövalmista laitetta lasten käsiin!

Pida lapsi liikkumattomana laitetta käytettäessä. Ota lapsi syliin tai laita hänet istumaan suorana tukien selkää tyynyillä. Voit asettaa lapsen myös taaksepäin kallistuvaan nojatuoliin.



Älä aseta lasta selälleen tai estä tätä hengittämästä nenän kautta!
Varmista että laitteen takaosassa olevat venttiilit ovat vapaina!
Varoitus! Laitteen venttiileistä voi poistua kuumaa ilmaa! Irroita laite pistorasiasta vasta kun laite on sammunut kokonaan ja jäähdytysvaihe on ohi!

Aseta aiemmin desinfioitu ja kuivattu Colibri kärkiosa lapsen nenään ja käynnistä laite virtanappulasta (laite jatkaa aiemmin säädetyllä teholla).

Kuva 3 – Colibri kärkiosan oikea asento

Aseta Colibri kärkiosan pääty avoimeen sieraimen. Kärjen tulee osoittaa hieman alaspäin ja ulospäin silmää kohti. Tässä asennossa voit varovasti liikuttaa Colibri kärkiosaa. Näin pystyt löytämään poskiontelon ja et vahingoita nenäkuorikon limakalvoja tai nenän väliseinän verisuonia.

Harvinaisissa tapauksissa on mahdollista, että vastasyntyneen sieraimet ovat liian pieniä nenäkärjen työntämiseksi sisään. Aseta tässä tapauksessa nenäkärki siten, että sieraimen on peitetty kokonaan. Nenän aspiraattorin teho riittää puhdistamaan nenäkäytävät oikein.

Joustavan letkun liitäntäosan tulisi osoittaa käytön aikana alaspäin.

Colibri kärkiosan patentoitu muotoilu kestää jopa 5ml ohutta nestettä ja estää ilman pääsyn letkuun.

Kuivaa ja hyvin paksua limaa voidaan liuottaa suolaliuksella. Älä käytä suolaliuosta enemmän kuin 5 ml kerrallaan ettei nestettä pääse letkuun ja laite vaurioidu!

Liuosta käyttäessäsi odota muutama minuutti ja poista vuotava ilma nenäliinalla. Vasta tämän jälkeen voit käyttää nenänniistäjää.

Nenätippoja ja muita lääkärien määräämiä lääkkeitä tulee käyttää vasta imemisen jälkeen!

Imun suositeltu kesto on 10 sekuntia/sierain.

Mikäli olet keskeyttänyt imun, sammuta laite. Voit käynnistää laitteen uudelleen kun moottori on kokonaan sammunut. Laite sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua aloituksesta mikäli laitetta on käytetty ilman katkoja. Laitteen voi turvallisuussyistä käynnistää uudelleen noin 50 minuutin kuluttua.



Älä käytä nenäimuria nenän pesuun!

Nosiboo Pro nenänniistäjää voi käyttää useamman kerran päivässä. Nenäkäytävät on suositeltavaa puhdistaa ennen nukkumaanmenoa ja ennen ruokailua jotta lapsi voisi hengittää rauhallisemmin.

Älä satuta lasta: esittele laite ja käytä sitä lapselle helposti lähestyttävällä tavalla.

Sammuta laite virtanapista aina käytön jälkeen.

Moottori toimii hetken sammutuksen jälkeen ja jäähdyttää laitetta.

Älä irroita laitetta verkkovirrasta ennen kuin laite on kokonaan sammunut!

Älä peitä laitteen takana olevia venttiileitä laitetta käyttäessäsi!

Irraita laite pistorasiasta vasta kun laite on kokonaan sammunut ja jäähdytysvaihe on ohi.

Suosittelu käyttöteho:

- * 0,04-0,08 baaria. Käytä pienintä tehoa imeväisille ja korkeinta yli 4-vuotiaille lapsille.
- * Imuteho riippuu liman paksuudesta ja sairauden kestosta.

5. Toimintahäiriöiden vianmääritys

Mikäli epäilet Nosiboo Pro laitteessa toimintahäiriötä lue kaksi seuraava kappaletta. Ensimmäinen osa Vianmääritys opas tarjoaa ratkaisuja konkreettisten ongelmien ratkaisemiseen. Taulukosta löydät ongelmat ja niiden ratkaisuehdotukset. Mikäli nämä ehdotukset eivät ratkaise ongelmaa Toimintahäiriöiden hallintaopas auttaa sinua/jälleenmyyjäsi paikallistamaan toimintahäiriön mahdollisimman nopeasti. Opettele nämä kappaleet huolellisesti mikäli toimintahäiriötä sattuu ilmenemään.

Valmistaja ei ole vastuussa luvattomista tuontilähteistä peräisin olevien tuotteiden vioittumisesta!

Vianmääritys opas

Toimintahäiriö	Syy	Ehdotukset
Laite ei käynnisty.	Virtajohtoa ei ole kytketty pistorasiaan.	Liitä virtajohto laitteeseen ja tämän jälkeen 230 V pistorasiaan.
Laite ei käynnisty.	Laite sammui turvallisuussyistä liikkakäytön vuoksi.	Lapsen turvallisuuden takaamiseksi pysäytä nenänniistäjän käyttö. Laitetta voi käyttää uudelleen noin 50 minuutin kuluttua.
Imuteho on heikentynyt.	Colibri kärkiosaa tukkeutui tai on asennettu väärin.	Irroita osat ja pese ne. Asenna osat kuivaamisen jälkeen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
Imuteho on heikentynyt.	Filterri on kulunut.	Irrota suodatin käyttöoppaan „Huolto ja säilytys” kappaleen mukaisesti.
Letkuun on päässyt nestettä tai ilmaa.	Colibri kärkiosaa ei asennettu oikein. Letkun liitäntäosa ei osoittanut alaspäin.	Sammuta laite, pese ja kuivaa Colibri kärkiosaa sekä letku. Tarkista filterri ja vaihda se mikäli tarpeellista.
Letkuun on päässyt nestettä tai ilmaa.	Suolaliuosta on käytetty liian paljon.	Käytä suolaliuosta enintään 5 ml. Sammuuta laite, pese ja kuivaa Colibri kärkiosaa sekä letku. Tarkista filterri ja vaihda se mikäli tarpeellista.

Mikäli laite ei toimi kunnolla vianmääritysoppaassa mainituista ohjeista huolimatta, käy Toimintahäiriöiden hallintaopas läpi yhdessä jälleenmyyjäsi kanssa.

Toimintahäiriöiden hallintaopas

Takuu on voimassa 24 kuukautta ostopäivästä alkaen. Takuu on voimassa vain mikäli laitetta on käytetty tarkoituksenmukaisesti ja siinä ei ole näkyviä vammoja. Käyttöhäiriön ilmetessä tulee selvittää onko häiriö käyttäjän itsensä aiheuttama. Valmistaja tarjoaa 24 kuukauden takuun mikäli laitetta on käytetty tarkoituksenmukaisesti. Seuraavat tarkistukset voi suorittaa joko käyttäjä itse tai antaa kauppiaan tai heidän edustajansa tehtäväksi esittämällä takuukortin tai -kuiitin. Kauppias tai oikeushenkilö, joka vastaa vian arvioinnista on velvollinen täyttämään Käyttöoppaan mukana tulevan tai oman takuukortin, tallentamaan vianmäärityksen yksityiskohdat ja toimittamaan ne valmistajalle 24 tunnin kuluessa.

Vianmääritys

Tarkempi kuvaus

Takuu

Visuaalinen tarkistus

Laitteen pohjassa olevan etiketin kunto.	Etiketissä näkyvät viat viittaavat laitteen kotelon avautumiseen.	Takuu ei korvaa virheellisestä käytöstä aiheutuneita vaurioita.
Muut vauriot kotelossa, naarmut, kuprut, kolhut, kulumat, naarmut ruuvien ympärillä.	Laitteen kotelon vauriot viittaavat laitteen kotelon avautumiseen.	Takuu ei korvaa virheellisestä käytöstä aiheutuneita vaurioita.
Likaantumisen merkit filterissä. Filterin aukon takana olevat vauriot, pöly laitteessa tai merkit jotka viittaavat pölyn kulkeutumisesta laitteeseen.	Filterin ylenmääräinen saastuminen, lian pääseminen laitteeseen viittaa laitteen väärinkäyttöön.	Takuu ei korvaa virheellisestä käytöstä aiheutuneita vaurioita.
Kaikki letkun saastumiseen viittaavaa.	Letkuun päässyt lika viittaa laitteen väärinkäyttöön.	Takuu ei korvaa virheellisestä käytöstä aiheutuneita vaurioita.

Manuaalinen tarkistus

Tarkista laitteen virtajohdon liitäntä ennen laitteen käyttöä.	Mikäli laitteen liitäntä (ei virtajohto) romahtaa, on liikuteltavissa tai poistettavissa, laitteen käynnistäminen ja käyttö on hengenvaarallista! Nämä häiriöt johtuvat ulkoisista tekijöistä eivätkä kuulu takuun piiriin.	Takuu ei korvaa virheellisestä käytöstä aiheutuneita vaurioita.
Mikä tahansa virtanapin häiriö.	Mikäli laitteen virtanappi on vahingoittunut, jumissa, liikuteltavissa tai tippuu johtuu toimintahäiriö ulkoisista seikoista. Laitteen käynnistäminen ja käyttö on tällöin hengenvaarallista!	Takuu ei korvaa virheellisestä käytöstä aiheutuneita vaurioita.

Verkkovirtaan liittäminen / käynnistäminen

Laitteeseen liitettävien verkkovirtaan pakkauksen mukana tulevan virtajohdon avulla.	Mikäli laite ei toimi näissä olosuhteissa virtajohdon vaihtaminen on suositeltavaa. Takuu ei kata näitä ulkoisista tekijöistä aiheutuneita vaurioita.	Takuu ei korvaa virheellisestä käytöstä aiheutuneita vaurioita.
Laitteen voi liittää verkkovirtaan, mutta laitteen käynnistämisen yhteydessä ilmenee ongelmia.	Mikäli käytön aikana ilmenee „epätavallisia” ilmiöitä kuten matala imuteho, savuaminen, voimakas haju, epätavallisen voimakas ääni, täärinä, virtakatkos, säätönappi ei toimi ja laite ei sammu 15 minuutin kuluttua.	Mikäli laitteen käytön yhteydessä ilmenee „epätavallisia” ilmiöitä ja laitteessa ei ole jälkiä fyysisistä vaurioista jotka on luoteltu kahdessa ensimmäisessä osassa, laite kuuluu takuun piiriin.

Takuu

Nosiboo Pro laitteen jälleenmyyjä on velvollinen käsittelemään asiakkaan reklamaatiot Käyttöoppaan Vianmäärittämissopas ja Toimintahäiriöiden hallintaopas kappaleihin liittyvät reklamaatiot välittömästi. Laitteen jälleenmyyjä on velvollinen tallentamaan vianmäärittäksen tiedot. Tämä voidaan tehdä jälleenmyyjän sisäisen dokumentaation puitteissa tai Käyttöoppaan mukana tulevalta takuukortilla. Tämän täytyy sisältää havaittu vika, päivämäärä ja laitteen pohjassa sijaitseva sarjanumero.

Asiantuntijapalvelun yhteystiedot

Attract Kft.
Unkari, H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1
Puh: +36 72 551 642 (Ma-Pe: 8:00 – 16:00)
E-mail: customerservice@nosiboo.com

6. Huolto ja säilytys

Virtajohdon voi irroittaa vasta kun laitteen jäähdytysvaihe on ohi! Irroita letku laitteesta ja Colibri kärkiosasta. Liitäntöosan takana on filteri mikä estää kiinteiden esineiden ja pölyn pääsyn laitteeseen. Mikäli laitteen teho huononee yllättäen, kehoitamme tarkistamaan filterin kunnon. Mikäli filteri on likainen tai tukossa, vaihda se uuteen. (Varaosien lista löytyy „Lisätarvikkeet, varaosat” osiosta.)

Kuva 1 – Filterin vaihtaminen

Puhdista kotelo kuivalla pehmeällä liinalla, älä käytä pesuaineita tai kemikaaleja!

Säilytä laite suljetussa tilassa suojattuna pölyltä ja vaurioilta (esim. kaapissa).

Mikäli sinulla on useampia lapsia, kehoitamme käyttämään jokaisen lapsen kohdalla erillistä Colibri kärkiosaa ja säilyttämään Colibrikärkiosat erillään.

Älä säilytä lämmönlähteen lähellä!

7. Puhdistaminen

1. Irroita letku ja päätyosa, tämän jälkeen pura Colibri kärkiosan kotelo.
2. Pese putki, päätyosa ja kotelo haalealla vedellä ja tiskiaineella ja anna kuivua.

Kuva 4 – Colibri kärkiosan puhdistaminen

3. Puhdista laitteen kotelo kuivalla pehmeällä liinalla, älä käytä pesuaineita tai kemikaaleja!
4. Pyyhi letku liinalla mikäli tarpeen. Älä pese putkea.

8. Tärkeää tietoa sähkömagneettisen häiriöiden estämiseksi.

Johdottomat verkkolaitteet, matkapuhelimet ja johdottomat puhelimet voivat vaikuttaa lääkintälaitteiden toimintaan, sillä laitteiden välillä voi esiintyä sähkömagneettisia häiriöitä. Sähkömagneettiset häiriöt voivat aiheuttaa haitallisia häiriötiloja lääkintälaitteissa mitkä voivat johtaa vaaratilanteisiin.

Yllä mainitun vuoksi, lääkintälaitteita ei saa yhdistää muihin laitteisiin.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus on määritelty standardeilla. Standardit määrittelevät lääkintälaitteen suojaustason ja sen sähkömagneettisen säteilyn enimmäismäärän.

Nosiboo Pro noudattaa EN 60601-1-2:2007 vaatimuksia. Tästä huolimatta kehoitamme noudattamaan alla olevia ohjeita laitetta käytettäessä.

- * Älä käytä matkapuhelintasi tai langatonta puhelinta tai muita sähkömagneettista säteilyä levittävää laitetta laitteen läheisyydessä! Muussa tapauksessa laitteessa voi ilmetä toimintahäiriö mikä voi johtaa vaaratilanteeseen.
- * Laitteet on suositeltavaa pitää vähintään 5 m etäisyydellä toisistaan. Tarkista toimivuus mikäli etäisyys on tätä pienempi!

9. Ympäristö

Älä hävitä laitetta talousjätteen mukana laitteen käyttöiän päätyttyä, sillä sähkölaitteet kuuluvat vaarallisiin jätteisiin. Tämä on kerrottu tuotteen pakkauksessa tällä merkillä:



Colibri kärkiosa ei ole vaaraksi ympäristölle ja sen voi hävittää talousjätteen mukana.

10. Tarkemmat tiedot

Laitteen sädeittävä teho: 200-390 W
 Differentiaalinen paine: 0,04-0,08 bar
 Max. ilmavirtaus: 54 l/min
 Virtalähde: 230 V 50-60 Hz
 IP-luokka: IP21
 Turvallisuusluokka: II
 Liityntöosan tyyppi: BF
 Lisätyt osat: kokonainen kotelo
 Käyttötyyppi: ei yhtäjaksoista käyttöä
 Käyttöaika: 15 minuuttista noin 50 minuuttiin
 Yhtäjaksoinen käyttö: max. 15 min
 Termostaattikytkimen lämpötila: 95 °C

Kotelon keskimääräinen lämpötila 1 minuutin käytön jälkeen: 30-35 °C
 Melutaso: max. 70 dB
 Lämpötilanvaihtelu: -10 °C... +40 °C
 Suhteellinen ilmankosteus: max. 75%
 Kotelon odotuksenmukainen käyttöikä (sähköiset osat): 3 vuotta
 Colibri kärkiosan odotuksenmukainen käyttöikä: 3 kuukautta
 Colibri kärkiosan sierainosan läpimitta 5,6 mm
 Colibri kärkiosan sierainosan pituus min. 32 mm
 Paino (kotelo): 972 g
 Mitat (kotelo, Leveys x Korkeus x Syvyys): 200 x 155 x 175 mm
 Mitat (koko pakkaus): 180 x 180 x 225 mm

Lisätarvikkeet, varaosat

Nosiboo Pro Accessory Set:

Tarvikkepakkaus, joka sisältää Nosiboo Pro -varaosia
<https://shop.nosiboo.eu/>



ACS-01-01 sininen

- * 1 Colibri-pää
- * 2 nenäkärkeä
- * 1 putki
- * 1 filterin
- * 1 harja



ACS-01-02 vaaleanpunainen

- * 1 Colibri-pää
- * 2 nenäkärkeä
- * 1 putki
- * 1 filterin
- * 1 harja



ACS-01-03 vihreä

- * 1 Colibri-pää
- * 2 nenäkärkeä
- * 1 putki
- * 1 filterin
- * 1 harja

Osia voi tilata Asiantuntijapalvelusta:

Attract Kft. H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 - Unkari Puh.: +36 72 551 642 (Ma-Pe: 8:00 – 16:00)
E-mail: customerservice@nosiboo.com



Virtajohto EU
NO-01-022-A6-0WE1



Virtajohto EU
NO-01-022-A6-0WM3



Liitäntäyksikkö
NO-01-050-H2-7BXX * sininen
NO-01-050-H2-7PXX * vaaleanpunainen
NO-01-050-H2-7GXX * vihreä

Kansainvälinen takuukortti

Takuu on voimassa 24 kuukautta laitteen ostosta. Takuu astuu voimaan vain mikäli laitetta on käytetty tarkoituksenmukaisesti ja siinä ei näy ulkoisia vaurioita. Laitteen on vakuuttanut sen laillistettu jälleenmyyjä. (Alkuperäinen ostokuitti on esitettävä jälleenmyyjälle.) Nosiboo Pro jälleenmyyjä on velvollinen käsittelemään asiakkaan Vianmääritysoppaaseen ja Toimintahäiriöiden hallintaoppaaseen perustuvat reklamaatiot välittömästi. Jälleenmyyjä on velvollinen dokumentoimaan vianmäärityksen. Tämä voidaan tehdä jälleenmyyjän sisäisen dokumentaation puitteissa tai käyttöoppaan mukana tulevalla takuukortilla. Dokumentoinnin täytyy sisältää havaittu vika, päivämäärä ja laitteen pohjassa sijaitseva sarjanumero.

Jälleenmyyjä täyttää

Jälleenmyyjän nimi ja osoite:

Nosiboo Pro nenänniistäjän sarjanumero (löytyy laitteen pohjasta):

Ostopäivä:

Toimintahäiriön tyyppi:

Toimintahäiriön päivämäärä:

Jälleenmyyjän allekirjoitus:
(päivämäärä, allekirjoitus ja leima)

Palvelu täyttää

Vastaanottopäivä:

Huolletut osat:

Uusi sarjanumero:

Palautuspäivä:

Allekirjoitus ja palvelun leima:

Korvattujen osien takuuaika on 12 kuukautta.

Jälleenmyyjä täyttää

Jälleenmyyjän nimi ja osoite:

Nosiboo Pro nenänniistäjän sarjanumero (löytyy laitteen pohjasta):

Ostopäivä:

Toimintahäiriön tyyppi:

Toimintahäiriön päivämäärä:

Jälleenmyyjän allekirjoitus:
(päivämäärä, allekirjoitus ja leima)

Palvelu täyttää

Vastaanottopäivä:

Huolletut osat:

Uusi sarjanumero:

Palautuspäivä:

Allekirjoitus ja palvelun leima:

Korvattujen osien takuuaika on 12 kuukautta.

Takuulla ei voi rajoittaa ostajalle lain mukaan kuuluvia oikeuksia.

Nosiboo pro on hygieeninen lääkintälaitte. Voit palauttaa tuotteen vain mikäli laitteen ja Colibri kärkiosan muovipakkaukset ovat paikallaan! Hygieenisyyden takaamiseksi emme korvaa laitetta mikäli pakkaus on avattu. Ohjaava ja sovellettava lainsäädäntö: Euroopan parlamentin ja komitean direktiivi 2011/83/EU § 16 (e) Itävallan Tasavallan FAGG: § 18 (1) 5 Unkari 45/2014. (II. 26.) Hallituksen asetus § 29 (1) (e) **Valmistaja ja asiantuntijapalvelu:** Attract Kft. Unkari, H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 Puh: +36 72 551 642 (Ma-Pe: 8:00 – 16:00)
E-mail: customerservice@nosiboo.com

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Nosiboo Pro bērnu aprūpes deguna aspirators

Satura rādītājs

Iepakojuma saturs	28
Priekšvārds	28
Brīdinājuma un drošības zīmes	28
Svarīgi drošības noteikumi	29
1. Paredzētais izmantojums	30
2. Iepazīšanās ar produktu	31
3. Pirmā izmantošanas reize	31
4. Lietošanas instrukcija	31
5. Bojājumu novēršana	33
6. Apkope un uzglabāšana	36
7. Tīrīšana	36
8. Svarīga informācija elektromagnētisko traucējumu samazināšanai	37
9. Vide	37
10. Parametri	37
11. Papildaprīkojums, rezerves daļas	37

NOSIBOO PRO IR MEDICĪNAS IERĪCE.

Jūs varat izmantot atteikuma tiesības, ja neesat lietojis Colibri galviņu un aizsargājošais folijs ir neskartas.

Vadošie un piemērojamie tiesību akti: Eiropas Parlamenta un Komisijas Direktīvas 2011/83/ES § 16 (e) Austrijas Republika: FAGG: § 18 (1) 5 Ungārija: 45/2014. (II. 26.) Valdlības dekrēts § 29 (1) (e)

Reģistrējiet savu ierīci un mēs jums kā dāvanu nosūfīsim kuponu, kas jums sniedz tiesības uz pirkumu ar atlaidi. Kuponu iespējams izmantot Nosiboo Pro ražotāja interneta veikalā: www.nosiboo.eu/product_registration

Iepakojuma saturs

* Colibri uzgalis * Strāvas vads * Lietošanas pamācība * Ierīce * Caurule * Rezerves noņemams uzgalis * Quick Guide

Priekšvārds

Cienījamais klient,

Mēs vēlētos Jūs sveikt ar KSCI, Red Dot Designe, German Design un PTPA godalgotā Nosiboo Pro deguna aspiratora iegādi! Lūdzu uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību, lai Jūs varētu izmantot deguna aspiratoru gadiem ilgi.



Lūdzu uzmanīgi izlasiet lietošanas pamācību pirms ierīces lietošanas!

Brīdinājuma un drošības zīmes

Lietošanas pamācībā vai uz ierīces etiķetes Jūs redzēsiet šādas zīmes:

Attract Kff. ir ISO 13485 sertificēts medicīnas ierīču ražotājs. Šis produkts ir MDD pārmantot ierīce (MDD Legacy Device).

Actor EUDAMED No.: HU-MF-000004252

Skaidrojums



BF tipa ierīces daļas (paaugstināta aizsardzība pret elektrības/strāvas triecienu)



• Produkta kods



• Brīdinājums!



• Class II ierīce (dubultā izolācija)



• Sērijas numurs



• Bīstamie atkritumi



• IIa klases medicīnas ierīce



• GTIN – globāli kauppanimikkeen numero (UDI-DI)



• Ražotāja nosaukums un adrese



• Valmistuserān numero (tuotannon tunnistie)



• Lasīt lietošanas pamācību



• Aizsargāts no 12,5 un lielākiem cietiem priekšmetiem, vertikāli krietošiem ūdens pilieniem.



• Izmantošanai tikai mājās apstākļos



• Glabāt sausul!

LAV

Svarīgi drošības noteikumi



Brīdinājums: Nenovērot zemāk aprakstītās iespējamās bīstamas situācijas, pastāv lietotāja traumas vai pat letāla negadījuma risks.

Drošības noteikumi attiecinās uz vispārējo izmantošanu

- * Ierīce paredzēta tikai un vienīgi deguna gļotai savākšanai no bērna deguna. To nedrīkst izmantot jebkādam citam nolūkam!
- * Ir AIZLIEGTS izmantot ierīci vannas istabā un jebkurā citā mitrā vai slapjā vidē!
- * Pārtrauciet ierīces lietošanu, ja korpusā ir iekļūvusi jebkāda šķidra vai cietā viela. Sazinieties ar kvalificētu apkalpošanas centru.
- * Ierīci var lietot tikai pieaugušie.
- * Lietošanas laikā ierīcei jābūt novietotai stabilā pozīcijā uz līdzena virsmas.
- * Nenovietojiet bērnu uz muguras un nepieļaujiet brīvās deguna atveres bloķēšanu ierīces lietošanas laikā!
- * Neatstāj ierīci bez uzraudzības blakus bērniem vai cilvēkiem ar ierobežotām fiziskām vai mentālām spējām.
- * Neatstāj ierīci bez uzraudzības blakus lieliem mājdzīvniekiem (kaķi, suņi), kas var to apgāzt.
- * Strāvas vads var apstāties ap bērna kaklu!
- * Ierīci nedrīkst lietot ar skābekli piesātināta vidē!
- * Lai novērstu pārmērīgu lietošanu un rūpējoties par Jūsu bērna drošību, ierīce automātiski izslēdzas pēc 15 minūtēm. Pēc izslēgšanas ierīci var atkārtoti ieslēgt. Pārkaršanas gadījumā ierīci aizliegts lietot apm. 50 minūtes. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdz, lasiet lietošanas pamācības 4. sadaļu.
- * Pirms ierīces lietošanas, pārīecinieties, ka visas detaļas ir atbilstoši savienotas!
- * Atkārtoti pārbaudiet, vai pēc firšanas esat ievietojis manšetcauruli Colibri uzgali.
- * Neizmantojiet Colibri uzgali un ierīci bez manšetcaurules.
- * Nelietojiet ierīci bez filtra.
- * Nelietojiet vairāk kā 5 ml fizioloģiskā šķīduma, jo iekļūstot caurulē šķīdums var izraisīt ierīces bojājumu.
- * Lietošanas laikā Colibri uzgala savienojuma punktam jābūt virzītam uz leju.
- * Pārtrauciet lietot ierīci, ja caurulē nokļūst gļotas vai sāls šķīdums, atvienojiet to no elektrofilka, iztukšojiet notīriet un nosusiniet Colibri uzgali un cauruli, pārbaudiet filtru un nomainiet to, ja tas ir mitrs vai aizsērējis.
- * Pārīecinieties, ka korpus, caurule un Colibri uzgals nav bojāti vai saplaisājuši! Nelietojiet ierīci, ja redzat, ka tā ir bojāta! Aizstājiet bojāto daļu! (Rezerves daļu sarakstu var atrast sadaļā „aksesuāri, rezerves daļas“).

- * Ja pēc ierīces izmantošanas uz bērna deguna parādās izsitumi vai apsārtums, pārtrauciet ierīces izmantošanu! Konsultējieties ar ārstu.
- * Izmantojiet ierīci tikai ar ražotāja piegādāto cauruli un Colibri uzgali!
- * Nepievienojiet Colibri galvu citām ierīcēm.

Drošības noteikumi pieslēdzot ierīci pie elektrofikla

- * Aizsargājiet strāvas vadu no bojājumiem! Nelauziet to un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus - bojāts vads var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- * Sautzējiēt strāvas vadu no karstuma (piemēram, krāsns, sildītājs vai konvektors), jo tas var bojāt vada izolāciju.
- * Izmantojiet ierīci tikai ar sausu cauruli.
- * Nenonēmiēt korpusa stiprinājuma skrūves. Nelietojiēt ierīci citiem mērkjiem.
- * Ierīces izmantošana ir aizliegta, ja nepareizas lietošanas dēļ uz korpusa vai vada parādjiēšās plaisas vai citas bojājuma pazīmes.
- * Negaidītas kļūmes vai darbības traucējumu gadjiēmā nekavējiēties izslēdziet ierīci un atvieniējiēt to no elektrofikla.

Drošības noteikumi ierīces atkārtotai izmantošanai

- * Vienmēr dezinficējiēt Colibri uzgali pēc lietošanas!
- * Neatstājiējiēt izjauktā Colibri uzgāja daļas bērniem sasniedzamā vietā, jo bērni var tās norīt.

Vispārēji piesardzības pasākumi

- * Izlasiet un ievērojiēt norādjiējumus no sadaļas „Svarīga informācija elektromagnētisko traucējumu samazināšanai”!
- * Izlasiet un ievērojiēt norādjiējumus no sadaļas „Vide”, ja vēlaties utillizēt ierīci vai tās detaļas

1. Paredzētais izmantojums

Nosiboo Pro bērnu deguna aspirātors paredzēts gļotu savākšanai no bērna deguna dobuma.

Vakuumu un aspirācijai nepieciešamo gaisa plūsmu rada šim nolūkam speciāli paredzētais sūkns. Colibri uzgali, kas tiek ievietots degunā, pievieno ierīcei ar caurules starpniecību. Colibri uzgāja patentētā konstrukcija novērš gļotu nokļūšanu ierīcē.

Paredzamie mērkji:

- * deguna caurlaidības nodrošināšana
- * bērnu saaukstēšanas komplikāciju profilakse un izveseļošanas procesa paātrināšana, atsūcot gļotas no deguna dobuma
- * bērnu alerģijai līdzgiēgi simptomu mazināšana, atsūcot gļotas no deguna dobuma.

Pacienti:

- * bērni (parasti, vecumā līdz 6 gadiem), kuri nespēji patstāviēgi atbrīvoties no deguna gļotām.

Saslimšanas un stāvokļi, pie kuriem ierīces izmantošana ir ieteicama (indikācijas):

- * deguna aizlikšanas novēršana
- * saaukstēšanas ārstēšana un deguna blakusdobumu superinfekcijas papildus ārstēšana
- * palgiēgārstēšana alerģisko simptomu mazināšanai.

Stāvokļi, kuros ierīces izmantošana ir aizliegta (kontraindikācijas):

- * hemofilija
- * ja bērnam ir paplašināti deguna starpsienas asinsvadi (bieža deguna asiņošana)
- * asins šķidrinošu preparātu lietošanas laikā
- * iedzīmtu anomāliju gadījumā (piemēram, aukslēju šķeltne)

Ieteicamais lietotājs:

- * Vecums: pieaugušais vīrs 18 g.v.
- * Dzimums: nav piemērojams (vīrietis vai sieviete)
- * Zināšanas: jābūt vispārējām, vecumam atbilstošām zināšanām
- * Izglītība: min. pamatskolas izglītība, ierīces izmantošanai nav nepieciešamas īpašas zināšanas.
- * Svarīgi: pārzināt pievienoto lietotāja pamācību.

2. Iepazīšanās ar produktu

Figure 1 – Nosiboo Pro bērnu deguna aspirators

3. Pirmā izmantošanas reize

Colibri uzgaļa salikšana

1. Nofīriet Colibri uzgaļa daļas (skatīt „Tīrīšana” un „Apkope un uzglabāšana” sadaļas).
2. Ievietojiet mašīncaurulī ar savienojumu apriņķotajā snipja korpusā.
3. Novietojiet snipja daļu, kurai nav savienojuma, pareizajā stāvoklī.
4. Piespiediet snipja elastīgo galu pie savienotās mašīnētes.
5. Pievienojiet vienu caurules galu Colibri uzgalim.

Ierīces pievienošana

6. Pārlicinieties, ka aiz savienojošā elementa ir uzstādīts filtrs.
7. Pievienojiet brīvu caurules galu ierīces korpusam.
8. Pievienojiet vienu 230V strāvas vada galu korpusa apakšējā daļā esošam spraudnim, otru galu iespraudiet elektrības kontaktligzdā.

Ierīce ir gatava lietošanai.

4. Lietošanas instrukcija

Pirms lietošanas, ierīce jānovieto tā, lai nepieciešamības gadījumā to varētu viegli atvienot no kontaktligzdas! Ierīci ieslēdz un izslēdz, piespiežot pogu korpusa augšējā daļā, sūkšanas intensitāti pielāgo, to pašu pogu pagriežot. Pielāgošanas iespēja nodrošina to, ka izvēloties atbilstošu sūkšanas intensitāti, jūs neizraisīsiet sekundāras deguna deformācijas. Pirms ierīces iedarbināšanas, izvēlieties jūsu bērna vecumam atbilstošu gaisa plūsmas ātrumu, vadoties pēc pievienotā attēla.

2. attēls – Sūkšanasjaudasregulēšana

Skalas minimālā vērtība ir piemērota jaundzimušajiem, vidējā vērtība – zīdaiņiem, maksimālā – maziem bērniem un pirmsskolas vecuma bērniem. Ierīces efektivitāti būtiski ietekmē gļotu biežums, slimības pakāpe un bērna individuālā anatomija. Ja gļotas ir šķidrās, ierīci var izmantot ar zemākiem uzstādījumiem, ja ļoti biezas – ar augstākiem uzstādījumiem nekā parasti.

Ierīci drīkst iedarbināt tikai pieaugušie. Nedodiet izmantošanai gatavu ierīci bērniem!

Darbinot ierīci, turiet bērnu stabilā pozīcijā. Apsēdiniet bērnu sev klēpī, vai apsēdiniet taisni, atbalstot bērna muguru pret spilvenu. Var sēdināt arī krēslā ar atpakaļ noliektu muguru.



Nenovietojiet bērnu galus uz muguras un neaizveriet bērnam brīvo deguna atveri!
Pārliedzinieties, ka ierīces atveres tās aizmugurē ir brīvas!
Uzmanību! Karsts gaiss var izdalīties no ierīces atverēm!

Ievietojiet iepriekš dezinficēto Colibri uzgali bērna degunā un ieslēdziet ierīci, piespiežot vadības pogu (ierīce darbojas pēc pēdējā reizē izmantotajiem uzstādījumiem).

3. atēls – Pareiza Colibri uzgaļa pozicionēšana

Ievirziet Colibri uzgaļa galu degunā. Galam jābūt virzītam uz leju un sāniem attiecībā pret acu ābolu. Šādā pozīcijā jūs varat viegli pakustināt uzgali. Ar šo metodi jūs varat piekļūt augšzokļa dobuma atverei, netraumējot deguna gliemežnīcas gļotādu un deguna strapsienas kapilārus.

Dažos gadījumos zīdaiņa nāsis ir pārāk mazas, lai tajās ievietotu uzgali. Tādā gadījumā novietojiet uzgali tā, lai tas pilnībā pārklātu nāsi. Aspiratora jauda ir pietiekama, lai šādā veidā izfīnītu nāsis.

Ierīces darbināšanas laikā elastīgās caurules savienojumam jābūt virzienā uz leju.

Colibri uzgaļa patentētā konstrukcija ļauj savākt līdz 5ml šķidru gļotu un nepieļauj šķidrums iekļūšanu elastīgajā caurulē.

Sausas un ļoti biezas gļotas var izšķīdināt ar sāls šķīdumiem. Nelietojiet vairāk par 5ml šķidruma vienā reizē – nonākot caurulē, tas vai bojāt ierīci.

Pēc šķidruma pielietošanas, pagaidiet dažas minūtes un noslauciet no deguna tekošo šķidrumu ar salveti. Tikai pēc tam izmantojams deguna aspirators.

Deguna pilienus un citus ārsta ieteiktus preparātus lieto pēc atsūkšanas procedūras!

Ieteicamais aspirēšanas ilgums ir 10 sekundes katrā nāsī

Ja Jūs vēlaties pārtraukt atsūkšanu, izslēdziet ierīci. Pēc tam, kad motors ir pilnībā izslēdzies, Jūs varat to atkārtoti ieslēgt. Ierīce izslēdzas pēc 15 minūtēm nepārtrauktas lietošanas gadījumā, bet tā var būt atkārtoti ieslēgta.

Pārmērīgās lietošanas gadījumā vai gadījumā, kad nav nodrošināta pietiekama ventilācija, siltuma slēdzis atslēgs ierīci un aizliegs atkārtoti izmantošanu uz apm. 50 minūtēm drošības apsvērumu dēļ.



Neizmantojiet deguna aspiratoru deguna mazgāšanai!

Nosiboo Pro bērnu deguna aspiratoru var izmantot vairākas reizes dienā. Elpceļus ieteicams fīrīt pirms gulētiešanas un barošanas, lai nodrošinātu mierīgu elpošanu.

Ceņšaties neradīt bērnam sāpes; esiet toleranti, iepazīstinot ar metodi un ierīci.

Pēc lietošanas vienmēr izslēdziet ierīci, izmantojot vadības pogu.

Pēc ierīces izslēgšanas motors kādu laiku darbosies, lai atdzistu.

Neatvienojiet ierīci no elektrofikla, ja tā nav pilnībā izslēgusies!

Izmantošanas laikā neaizklājiet ierīces aizmugurē esošās atveres!

Atvienojiet ierīci, kad tā ir pilnībā izslēgusies un beigusies dzesēšana.

Ierīcām jābūt diapazonā:

- * 0.04 – 0.08 bar. Izmantojiet diapazona apakšējās vērtības darbam ar zīdaiņiem, un augšējās – 4 un vairāk gadus veciem bērniem
- * Sūkšanas jaudu būtiski ietekmē gļotu biežums un slimības raksturs

5. Darbības problēmu novēršana

Ja rodas aizdomas par Nosiboo Pro ierīces darbības kļūdu, aplūkojiet nākamās divas nodaļas. Vispirms Problēmu noteikšanas vadlīnijas sniedz priekšlikumus konkrētu problēmu risināšanai. Tabulā norādītas problēmas un ieteikumi to risināšanai.

Ja šie ieteikumi neatrisina problēmu, Darbības traucējumu novēršanas vadlīnijas palīdz jums/tirgotājam/izplatītājam pēc iespējas ātrāk lokalizēt darbības traucējumu. Lūdzu, darbības traucējumu gadījumā rūpīgi izpētiet šīs nodaļas.

Ražotājs neuzņemas atbildību par tādu produktu kļūmēm, kas ir iegūti no nepilnvarota importa avota!

Problēmu novēršanas pamācība

Darbības traucējums	Iemesls	Ieteikums
Ierīci nav iespējams ieslēgt	Nav pievienots spraudnis	Pievienojiet ierīcei strāvas vadu un pieslēdziet to elektrības tīklam.
Ierīci nav iespējams ieslēgt	Ierīce izslēgusies, pārsniedzot darbības laika limitu	Rūpējoties par bērna veselību, pārtrauciet ierīces izmantošanu. To varēs izmantot atkal pēc apm. 50 minūtēm.
Samazinājusies sūkšanas intensitāte	Colibri uzgalis ir nobloķēts vai nepareizi salikts.	Izjauciet un noīrietiet detaļas, tad samontējiet, balstoties uz lietotāja pamācībā esošu instrukciju.
Samazinājusies sūkšanas intensitāte	Filtera nolietojums.	Nomainiet filtru, kā aprakstīts lietotāja pamācības „Apkope un uzglabāšana” sadaļā.
Caurulē nonācis šķidrums vai gļotas	Colibri uzgalis tika turēts nepareizā pozīcijā – Caurules savienojuma punkts nebija virzīts uz leju.	Izslēdziet ierīci, nomazgājiet un nosusiniet Colibri uzgali un cauruli. Pārbaudiet filtru un nomainiet to, ja nepieciešams.
Caurulē nonācis šķidrums vai gļotas	Tika izmantots pārāk daudz sāls šķīduma.	Samaziniet sāls šķīduma daudzumu līdz mazāk nekā 5 mL. Izslēdziet ierīci, pēc tam nožāvējiet Colibri galvu un ierīces korpusu. Pārbaudiet filtru un nomainiet to, ja nepieciešams.

Ja ierīces darbība neatjaunojas, pēc Problēmu novēršanas pamācībā aprakstīto ieteikumu izmantošanas, meklējiet informāciju Darbības traucējumu pārvaldīšanas pamācībā/pie pārdevēja/izplatītāja.

Darbības traucējumu pārvaldīšanas pamācība

Garantija ir spēkā 24 mēnešus no pirkuma brīža. Tā darbojas tikai tad, ja ierīce ir bijusi izmantota paredzētam nolūkam un tai nav bojājuma pazīmes. Nākamais solis ir darbības traucējuma esamības apzināšana, tad jānoskaidro, tā ir vai nav lietotāja vaina. Paredzētās izmantošanas gadījumā ražotājs sniedz 24 mēnešu aizvietošanas garantiju. Zemāk aprakstītās pārbaudes lietotājs var veikt patstāvīgi vai arī ar ierīces izplatītāja palīdzību/Itā pilnvaroto pārstāvi, uzrādot pirkuma čekus un garantijas talonu. Izplatītājs vai oficiālais pārstāvis, kurš veic bojājuma novērtēšanu, obligāti aizpilda lietotāja pamācībai pievienoto garantijas karti vai sniedz savu garantijas dokumentu, kur detalizēti apraksta problēmas novēršanas etapus, un 24 stundu laikā pārsūta to ražotājam.

Problēmu novēršana

Detalizēts apraksts

Garantijas uzdevumi

Ierīces vizuāla apskate

Bojājuma pazīmes uz korpusa – skrāpējumi, pacēlumi, plankumi, skrāpējumi ap skrūvēm

Etiķetes bojājuma pazīmes norāda uz notikušo ierīces korpusa atvēršanu.

Nepareizas lietošanas rezultāts, nomainas garantija nedarbojas.

Kontaminācijas pazīmes uz vai ap filtra.

Ierīces korpusa bojājuma pazīmes norāda uz notikušo ierīces koprusa atvēršanu.

Nepareizas lietošanas rezultāts, nomainas garantija nedarbojas.

Aiz filtra esošās atveres bojājums, putekļu klātbūtne ierīcē, vai putekļu iekļūšanas pazīmes.

Izleikts filtra piesārņojums un nefirumi ierīcē norāda uz nepareizu izmantošanu.

Nepareizas lietošanas rezultāts, nomainas garantija nedarbojas.

Jebkura veida caurules piesārņojums.

Piesārņojums caurulē norāda uz neatbilstošu izmantošanu.

Nepareizas lietošanas rezultāts, nomainas garantija nedarbojas.

Manuāla pārbaude

Pārbaudiet strāvas vada savienojumu ar ierīci pirms tās izmantošanas.

Ja savienojuma vieta (nevis pats strāvas vads) ir iespiedusies, un to var pakustināt vai izņemt ārā, ierīces ieslēgšana un iedarbināšana apdraud dzīvību! Šādus bojājumus izraisa ārējā iedarbība, tāpēc attiecībā uz tiem garantija netiek piemērota.

Nepareizas lietošanas rezultāts, nomainas garantija nedarbojas.

Jebkura veida vadības pogas darbības traucējumi.

Ja vadības poga ierīces augšējā daļā ir bojāta, iespējams, brīvi kustās vai izkrit, šāds bojājums ir ārējo faktoru izraisīts un garantija to nesedz. Ierīces ieslēgšana un darbināšana apdraud dzīvību!

Nepareizas lietošanas rezultāts, nomainas garantija nedarbojas.

Elektroapgāde/ieslēgšana

Ierīces elektroapgāde netiek ar komplektā esošā strāvas vada palīdzību

Ja ierīce nesāk darboties minētajos apstākļos, ieteicama strāvas vada maiņa. Tādus bojājumus izraisa ārējā iedarbība, attiecīgi, tos garantija nesedz.

Nepareizas lietošanas rezultāts, nomainas garantija nedarbojas.

Ierīces elektroapgāde nav traucēta, bet traucējumi rodas pēc ierīces ieslēgšanas.

Ja darbinot ierīci, novērojot „neparastas” parādības, piem., zema sūkšanas jauda, dūmu izdāle, spēcīga smaka, neparasti skaļa dūksana vai klikšķi, trīce, īssavienojums, ierīce neregulējamas ar vadības pogas palīdzību un neizslēdzas pēc 15 minūtes.

Ja darbinot ierīci, novērojot „neparastas” parādības, un uz ierīces nav pirmajos divos punktos aprakstītās fiziska bojājuma pazīmes, lietotāja ierīce ir nomaināma garantijas kārtībā. Nomainīju organizē izplatītājs, visas saistītās izmaksas sedz ražotājs.

LAV

Garantijas uzdevumi

Nosiboo Pro ierīces izplatītājam ir pienākums bez kavēšanās parūpēties par klientu sūdzībām, kas attiecas uz aspektiem, kas ietverti Lietotāja rokasgrāmatas nodaļās Problēmu noteikšanas vadlīnijas un Darbības traucējumu novēršanas vadlīnijas. Ierīces izplatītājam ir pienākums saglabāt rakstisku protokolu par problēmu novēršanu. To var darīt izplatītāja iekšējās dokumentācijas ietvaros vai arī uz garantijas kartītes, kas pievienota Lietotāja rokasgrāmatai. Tajā jāietver konstatētais darbības traucējums, datums un unikālais sērijas numurs, kuru var atrast uz etiķetes ierīces apakšā.

Specializētā servisa centra kontakti

Attract Kft.
H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 - Ungārija
Tel.: +36 72 551 642 (pirmdiena-piektdiena: 8.00-16.00)
E-pasts: customerservice@nosiboo.com

6. Apkope un uzglabāšana

Strāvas vadu drīkst atvienot no elektrības tīkla un no ierīces tikai tad, kad atdzesēšanas process ir pilnībā beidzies! Atvienojiet cauruli no ierīces un Colibri uzgali. Aiz korpusa puses savienojuma ir speciāls filtrs. Tas būtu jānomaina pēc 300 lietošanas reizēm, vai 1 gada intensīvas lietošanas gadījumā. Ja ierīci izmantojat retāk, un filtrs nav piesārņots, to var izmantot ilgāk. Filtra pasūtījuma numurs: AC-04-01.

1. attēls – Filtra nomaiņa

Tīriet korpusu ar sausu, mikstu audumu. Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus un citas ķīmiskas vielas.

Turēt ierīci slēgtā telpā, kur tā ir aizsargāta no putekļiem un bojājumiem (piemēram, skapī).

Ja jums ir vairāki bērni, iesakam katram bērnam lietot atsevišķu Colibri uzgali, un uzglabāt tos atdalīti.

Neglabājiet siltuma avota tuvumā!

7. Tīrīšana

1. Noņemiet cauruli un uzgali, tad izjauciet tā ietvaru.

2. Nomazgājiet cauruli ar paplašinātu galu, uzgali un tā ietvaru ar remdenu ūdeni un trauku mazgājamo līdzekli un ļaujiet tiem izžūt.

4. attēls – Colibri uzgala tīrīšana

3. Tīriet ierīces korpusu ar sausu, mikstu drāniņu; neizmantojiet nekādus šķidrumus, mazgāšanas līdzekļus vai ķīmiskās vielas.

4. Ja nepieciešams, ar drāniņu noslaukiet cauruli. Nemazgājiet cauruli.

8. Svarīga informācija elektromagnētisko traucējumu mazināšanai

Medicīniskā aprikojuma darbību var ietekmēt mājas bezvadu fīkla aprikojums, mobilie un bezvadu telefoni, starp ierīcēm rodoties elektromagnētiskām interferencēm. Elektromagnētiskās interferences var radīt traucējumus medicīnisko ierīču darbībā un var izraisīt ārkārtas situācijas.

Augstāk minēto iemeslu dēļ, medicīniskās ierīces nedrīkst mijiedarboties ar jebkādu citu aprikojumu.

Lai nodrošinātu elektromagnētisko saderību, standartos ir noteiktas attiecīgas prasības. Standarti nosaka medicīniskās ierīces aizsardzības līmeni un to radītā elektromagnētiskā starojuma maksimālo jaudu.

Nosiboo Pro bērnu deguna aspirators atbilst EN 60601-1-2:2007 prasībām. Neskatoties uz to, lietošanas laikā jums jāievēro sekojošās instrukcijas:

- * Nelietojiet savu mobilo tālruni, bezvadu tālruni un citas ierīces, kas rada spēcīgu elektromagnētisko starojumu, Nosiboo Pro ierīces tuvumā!
- * Pretējā gadījumā ierīce var darboties nepareizi, kas var radīt avārijas situāciju leteicamais attālums starp ierīcēm ir vismaz 5m! Ja šis attālums ir mazāks, pārliecinieties par to, ka ierīce darbojas pareizi!

9. Vide

Elektronikas produkti uzskatāmi par bištamamiem atkritumiem, tāpēc neizmetiet ierīci pēc tās kalpošanas laika beigām kopā ar sadzīves atkritumiem. To apzīmē sekojošā zīme uz produkta iepakojuma:



Colibri uzgālis nerada nopietnu apdraudējumu videi, un var tikt izmests kopā ar sadzīves atkritumiem.

10. Specifikācija

Motora regulējamā jauda: 200–390 W
 Spiediena intervāls: 0.04-0.08 bar
 Maks. Gaisa plūsma: 54 l/min
 Barošana: 230 V 50-60 Hz
 IP klase: IP21
 Drošības klase: II
 Detaļu tips: BF
 Detaļas: samontēts korpus
 Darbināšanas tips: neparedz nepārtrauktu darbību
 Darbības ilgums: 15 minūti ieslēgts / apm. 50 minūtes izslēgts
 Nepārtrauktas darbības ilgums: maksimāli 15 minūtes

Siltuma slēdža robežtemperatūra: 95 °C
 Korpusa vidējā temperatūra: 30-35 °C, pēc 1 minūtes nepārtrauktās darbības
 Skāļuma līmenis: max. 70 dB
 Temperatūras diapazons: -10 °C... +40 °C
 Relatīvais mitrums: mne vairāk par 75%
 Paredzamais kalpošanas laiks (elektriskās daļas): 3 gadi
 Colibri uzgāļa paredzamais kalpošanas laiks: 3 mēneši
 Colibri uzgāļa degunā ievietojamā gala diametrs: min. 5.6 mm
 Colibri uzgāļa degunā ievietojamā gala garums: min. 32 mm
 Svārs (korpus): 972 g
 Izmēri (korpus, plat. X aug. X gar.): 200 x 155 x 175 mm
 Izmēri (iekpojums): 180 x 180 x 225 mm

Detāļas, rezerves daļas

Nosiboo Pro Accessory Set:

Piederumu iepakojums, kurā ietilpst Nosiboo Pro rezerves daļas
<https://shop.nosiboo.eu/>



ACS-01-01 zils

- * 1 Colibri galva
- * 2 uzgali
- * 1 caurule
- * 1 filtrs
- * 1 birste



ACS-01-02 rozā

- * 1 Colibri galva
- * 2 uzgali
- * 1 caurule
- * 1 filtrs
- * 1 birste



ACS-01-03 zaļš

- * 1 Colibri galva
- * 2 uzgali
- * 1 caurule
- * 1 filtrs
- * 1 birste


Detāļas var pasūtīt Specializētā servisa centrā:

Attract Kft. H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 - Ungārija Tel.: +36 72 551 642 (pirmdiena-piektdiena: 8.00-16.00)

E-mail: customerservice@nosiboo.com



Strāvas vads EU
NO-01-022-A6-0WE1

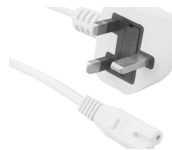

Strāvas vads UK
NO-01-022-A6-0WM3



Savienojums
NO-01-050-H2-7BXX * zils
NO-01-050-H2-7PXX * rozā
NO-01-050-H2-7GXX * zaļš

Starptautiskā garantijas karte

Garantija ir spēkā 24 mēnešus no pirkum brīža. Tā darbojas tikai tad, ja ierīce ir bijusi izmantota paredzētam nolūkam un tai nav bojājuma pazīmes. Garantiju apstiprina ierīces pilnvarotais izplatītājs (jābūt oriģinālai izplatītāja pavadzīmei). Nosiboo Pro ierīces izplatītājam ir pienākums ātri risināt klienta sūdzības, kas pamatojas uz Problēmu novēršanas pamācībā un Darbības traucējumu pārvaldīšanas pamācībā minētiem aspektiem. Garantijas nosacījumu gadījumā ierīce ir nomaināma nekavējoties. Ierīces izplatītāja pienākums ir saglabēt rakstisku problēmas risināšanas aprakstu. To var veikt saskaņā ar izplatītāja iekšējiem dokumentācijas noteikumiem, vai izmantojot Lietošanas pamācībai pievienoto garantijas karti. Pierakstā jānorāda pamanītais bojājums, datums, kā arī ierīces unikālais sērijas numurs, kas atrodas uz ierīces apakšā esošās etiķetes.

Aizpilda izplatītājs

Izplatītāja nosaukums un adrese

Nosiboo Pro deguna aspiratora sērijas numurs
(atrodas ierīces apakšā uz etiķetes)

Pirkuma datums

Bojājuma veids

Bojājuma datums

Izplatītāja apstiprinājums
(datums, paraksts un zīmogs)

Aizpilda pakalpojuma sniedzējs

Saņemšanas datums:

Remontētās detaļas:

Jaunais sērijas numurs:

Atgriešanas datums:

Līdzparaksts un zīmogs par pakalpojuma saņemšanu

Aizvietoto detaļu garantija ir derīga 12 mēnešus.

Aizpilda izplatītājs

Izplatītāja nosaukums un adrese

Nosiboo Pro deguna aspiratora sērijas numurs
(atrodas ierīces apakšā uz etiķetes)

Pirkuma datums

Bojājuma veids

Bojājuma datums

Izplatītāja apstiprinājums
(datums, paraksts un zīmogs)

Aizpilda pakalpojuma sniedzējs

Saņemšanas datums:

Remontētās detaļas:

Jaunais sērijas numurs:

Atgriešanas datums:

Līdzparaksts un zīmogs par pakalpojuma saņemšanu

Aizvietoto detaļu garantija ir derīga 12 mēnešus.

Garantijas tiesību izmantošana neietekmē patērētāja netiešās garantijas tiesības.

Nosiboo Pro ir medicīnais ierīce. Jūs varat izmantot atteikuma tiesības, ja neesat lietojis Colibri galviņu un aizsargājošais folijs ir neskartas. mēs palūkam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Var gadīties, ka aizstāta ierīce var atšķirties ar dažādiem tehniskajiem parametriem. Vadošie un piemērojamie tiesību akti: Eiropas Parlamenta un Komisijas Direktīvas 2011/83/ES § 16 (e) Austrijas Republika: FAGG: § 18 (1) 5 Ungārija: 45/2014. (II. 26.) Valdības dekrēts § 29 (1) (e)

Ražotāja un speciālista servisa centrs: Attract Kft. H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 - Ungārija Tel.: +36 72 551 642 (pirmdiena-piektdiena: 8.00-16.00)
E-pasts: customerservice@nosiboo.com

NAUDOTOJO VADOVAS

Nosiboo Pro nosies aspiratorių

Turinys

Pakuotės turinys	40
Ižanga	40
Išpėjimo ir saugos ženklai	40
Svarbios saugos instrukcijos	41
1. Naudojimo paskirtis	42
2. Gaminio įdėjimas	43
3. Naudojimas pirmą kartą	43
4. Naudojimo instrukcijos	43
5. Gedimų šalinimas	45
6. Priežiūra ir laikymas	48
7. Valymas	48
8. Svarbi informacija apie elektromagnetinių trukdžių šalinimą	49
9. Aplinka	49
10. Specifikacijos	49
11. Priedai, atsarginės dalys	49

NOSIBOO PRO YRA HIGIENINIS MEDICINOS PRIETAISAS

Gaminio atsisakymo teise pasinaudoti galite tik tuo atveju, jei prietaisas ir ant nosies antgalio esanti apsauginė plėvelė yra nepažeisti.

Rekomendacinio pobūdžio ir galiojančios teisės aktai: Europos Parlamento ir Komisijos direktyvos 2011/83/ES 16 skyriaus e dalis, Austrijos Respublika: FAGG: 18 skyriaus 1 dalies 5 punktas, Vengrija: 45/2014. (II. 26.) Vyriausybės nutarimas, 29 skyriaus 1 dalies e punktas.

Užregistruokite savo prietaisą ir dovanų jums atsiųsime kuponą, kuriuo pasinaudoję galėsite gauti nuolaidą pirkiniui. Kuponą panaudoti galite Nosiboo gamintojo internetinėje parduotuvėje. www.nosiboo.eu/product_registration

Pakuotės turinys

* Colibri galvutė * Maitinimo laidas * Naudotojo vadovas * Prietaisas * Vamzdelis * Atsarginis nuimamas nosies antgalis * Quick Guide

Ižanga

Gerb. kliente,

sveikiname įsigijus mūsų KSCI, PIPA, Red Dot Design ir German Design apdovanojimus pelniusį Nosiboo Pro nosies aspiratorių!

Atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą, kad nosies aspiratorių galėtumėte naudoti ištaisus metus ir galėtumėte ilgą laiką apsaugoti nuo ligų.



Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą!

Išpėjimo ir saugos ženklai

Naudotojo vadove arba ant prietaiso etikečių galite matyti toliau pavaizduotus ženklus.

Attract Kft. ir ISO 13485 sertifikėtas medicinas ierėiu ražotėjs. Šis produktas ir MDD pėrmanotof ierice (MDD Legacy Device).

Actor EUDAMED No.: HU-MF-000004252



PAGAMINTAS: ATTRACT KFT.
7622 Pėecs, Sėrkėsi ūt 1/1 – Vengrija

T +36 72 551 642 customerservice@nosiboo.com
www.nosiboo.eu

DMR-07/A05/2/V10 * Galioja nuo: 01. 04. 2022 * **Puslapis: 40/52**

Paaiškinimas



BF tipo su žmonėmis besileičiančios dalys (didesnė apsauga nuo elektros smūgio)

REF

Nuoroda (užsakymo numeris)



Ispėjimas!



II klasės prietaisas (dviguba izoliacija)

SN

Serijos numeris



Pavojingos atliekos



IIa klasės medicinos prietaisas

GTIN

GTIN – Pasaulinis prekybos prekės numeris (UDI-DI)



Gamintojo pavadinimas ir adresas

LOT

Partijos numeris (gamybos identifi katorius)



Perskaitykite naudotojo vadovą

IP21

Apsauga nuo didesnių nei 12,5 mm kietų objektų ir vertikaliai krintančių vandens lašų.



Skirta naudoti tik namuose



Laikyti sausai!

LIT

Svarbios saugos instrukcijos



Ispėjimas: neišvengus toliau nurodytų galimų pavojingų situacijų, naudotojas gali susižaloti ar net gali įvykti mirtina nelaimė.

Saugos instrukcijos dėl bendrojo naudojimo

- * Prietaisas turi būti naudojamas tik nosies gleivėms šalinti iš vaiko nosies. Jo negalima naudoti jokiam kitam tikslui!
- * **DRAUDŽIAMA** prietaisą naudoti vonioje ar bet kioje kitoje drėgnoje ar šlapioje aplinkoje!
- * Jei į korpusą pateko skysčio ar kietųjų medžiagų, nustokite naudoti prietaisą. Kreipkitės į kvalifikuotą techninės priežiūros centrą.
- * Prietaisą gali naudoti tik suaugusieji.
- * Kai prietaisas naudojamas, jis turi būti stabilioje padėtyje, naudotojui stovint ant lygaus paviršiaus.
- * Kai naudojate prietaisą, neguldykite vaiko ant nugaros ir neužkimškite laisvos nosies angos!
- * Nepalikite prietaiso be priežiūros šalia vaikų ar žmonių, kurių fiziniai ar psichiniai gebėjimai susilpnėję!
- * Nepalikite prietaiso be priežiūros šalia didelių naminių gyvūnų (šunų, kačių), kurie gali jį apversti!
- * Maitinimo laidas gali lengvai apsvyriuoti aplink vaiko kaklą!
- * Prietaiso negalima naudoti deguonies prisotintoje aplinkoje (klinikinėmis aplinkybėmis)!
- * Kad prietaisas nebūtų naudojamas per dažnai ir siekiant užtikrinti jūsų vaiko saugą, prietaisas po 15 minučių automatiškai išsijungia. Po privertinio išjungimo prietaisą vėl galima įjungti. Perkaitimo atveju elektronika 50 minučių neleis vėl naudoti prietaiso. Jei reikia daugiau informacijos, skaitykite naudotojo vadovo 4 skyrių.
- * Prieš naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad visi elementai tinkamai prijungti!
- * Prieš naudodami, du kartus patikrinkite, ar po valymo procedūros įstatėte (sausą) žiedinį vamzdelį į Colibri galvutę.
- * Nenaudokite Colibri galvutės ir prietaiso be žiedinio vamzdelio.
- * Nenaudokite prietaiso be oro tinklo.
- * Nenaudokite daugiau nei 5 ml fiziologinio tirpalo, nes jei tirpalo patektų į vamzdelį, jis gali sugadinti prietaisą.
- * Naudojant, Colibri galvutės prijungimo taškas turi būti nukreiptas žemyn.
- * Jei į vamzdelį pateko gleivių arba fiziologinio tirpalo, nustokite naudoti prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo, tada ištuštinkite Colibri galvutę, išvalykite ir nusausinkite Colibri galvutę ir vamzdelį, patikrinkite oro vamzdelį ir pakeiskite jį, jei jis drėgnas arba užsikimšęs.
- * Įsitikinkite, kad korpusas, vamzdelis ir Colibri galvutė nepažeisti ir neįtrūkę! Nenaudokite prietaiso, jei matote, kad jis pažeistas! Pakeiskite pažeistą dalį! (Atrsarginių dalių sąrašas pateiktas skyriuje „Priedai, atsarginės dalys“.)

- * Jei panaudojus prietaisą ant vaiko nosies atsiranda bėrimo ar paraudimo požymių, prietaiso nebenaudokite! Kreipkitės į gydytoją.
- * Prietaisą naudokite tik su gamintojo tiekiamu vamzdeliu ir Colibri galvute!
- * Nejunkite Colibri galvutės prie jokių kitų prietaisų.

Saugos instrukcijos dėl prietaiso jungimo prie maitinimo tinklo

- * Saugokite, kad nepažeistumėte maitinimo laido! Nesulaužykite jo, nedėkite ant jo sunkių objektų, nes pažeistas laidas gali sukelti elektros smūgį.
- * Laikykite maitinimo laidą atokiai nuo šilumos šaltinio (pvz., krosnies, šildytuvo ir konvektoriaus), nes galite pažeisti izoliaciją.
- * Prietaisą naudokite tik tada, kai vamzdelis ir Colibri galvutė yra sausi.
- * Neišimkite korpuso tvirtinimo varžtų. Neperdarykite prietaiso jokiems kitiems tikslams.
- * Draudžiama naudoti prietaisą, jei korpusas arba maitinimo laidas yra sulūžęs ar įtrūkęs dėl netinkamo naudojimo.
- * Netikėtus trikties ar gedimo atveju nedelsdami išjunkite prietaisą ir nutraukite maitinimo tiekimą, atjungdami prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Saugos instrukcijos dėl prietaiso naudojimo kitą kartą

- * Po naudojimo visada dezinfekuokite Colibri galvutę!
- * Išardytos Colibri galvutės dalių nepalikite vaikams pasiekiamoje vietoje, nes jie gali jas praryti.

Bendrosios atsargumo priemonės

- * Perskaitykite ir laikykitės instrukcijų, pateiktų skyriuje „Svarbi informacija apie elektromagnetinių trukdžių mažinimą“!
- * Jei norite išmesti prietaisą ar bet kurią jo dalį, perskaitykite ir laikykitės instrukcijų, pateiktų skyriuje „Aplinka“.

1. Naudojimo paskirtis

Nosiboo Pro nosies aspiratorius skirtas nosies gleivėms iš vaiko nosies šalinti.

Vakuumas ir oro srautas, reikalingi norint siurbti, sukuriami siurbimo prietaisu, specialiai skirtu šiam tikslui. Colibri galvutė, kuri yra dedama į nosį, vamzdeliu yra prijungta prie prietaiso. Colibri galvutė pasižymi patentuota konstrukcija, kuri neleidžia gleivėms patekti į prietaisą.

Numatytoji paskirtis:

- * užtikrinti kvėpavimą per nosį kūdikiams;
- * užkirsti kelią vaikystėje pasireiškiančio įprasto peršalimo sukeliama komplikacijoms ir pagreitinti gijimo procesą išsiurbiant nosies gleives;
- * numalšinti vaikystėje pasireiškiančius alergiją primenančius simptomus, pašalinant nosies gleives.

Pacientai, kuriems skirtas šis prietaisas:

- * vaikai (paprastai jaunesni nei 6 metų amžiaus), kurie patys negali iš nosies išsipūsti nosies gleivių.

Liga, būklė, kuriai esant reikalinga procedūra (indikacija):

- * kai reikia atkimsiti nosį;
- * įprasto peršalimo gydymas ir pagalbinis superinfekcinių paranazinių sinusų uždegimo gydymas;
- * pagalbinis alerginės infekcinės ligos gydymas.

Sąlygos, kurioms esant prietaiso naudoti negalima (kontraindikacijos):

- * hemofilija;
- * jei dėl išsiplėtusių nosies pertvaros gleivinės kraujagyslių dažnai pasireiškia kraujavimas iš nosies;
- * jei vartojami kraują skystinantys vaistai;
- * jei yra įgimtų apsigimimų (pvz., vilko gomurys).

Naudotojas, kuriam rekomenduojama naudoti prietaisą

- * Amžius: suaugusieji, vyresni nei 18 metų amžiaus
- * Lytis: netaikoma (vyras ar moteris)
- * Žinios: turi turėti bendrą supratimą pagal savo amžių
- * Išsilavinimas: bent pagrindinis išsilavinimas; norint naudoti šį prietaisą, jokių specialių žinių nereikia.
- * Svarbu: naudotojo vadovo, pridedamo pakuotėje, žinojimas.

2. Gaminio įdėjimas

1 pav. Nosiboo Pro nosies aspiratorius

3. Naudojimas pirmą kartą

Colibri galvutės surinkimas

1. Nuvalykite ir nusausinkite Colibri galvutės dalis (žr. skyrius „Valymas“ ir „Priežiūra ir laikymas“).
2. Įstatykite žiedinį vamzdelį į antgalio korpusą, pateiktą su jungtimi.
3. Antgalio korpusą, kuriame nėra jungties, įstatykite į tinkamą padėtį.
4. Užspauskite lankstų antgalį ant jungties žiedo.
5. Vieną vamzdelio galą prijunkite prie Colibri galvutės.

Prietaiso prijungimas

6. Įsitinkinkite, kad oro tinkelis už prijungimo elemento yra reikiamoje vietoje.
7. Laisvą vamzdelio galą prijunkite prie prietaiso korpuso.
8. Vieną 230 V maitinimo laido galą prijunkite prie apatinės prietaiso korpuso dalies kištuko, o kitą galą – prie lizdo.

Prietaisas paruoštas naudoti.

4. Naudojimo instrukcijos

Prieš naudojant, prietaisą reikia laikyti taip, kad maitinimo laido kištuką būtų galima lengvai ištraukti iš lizdo! Prietaisą įjungti arba išjungti galite spausdami ir kontroliuodami siurbimo intensyvumą, pasukę korpuso viršuje esantį mygtuką. Galimybė reguliuoti užtikrina, kad pasirinkę atitinkamą siurbimo galią tėvai negalėtų sukelti jokios antrinės deformacijos nosyje. Prieš įjungdami prietaisą, raskite reikiamą pagal jūsų vaiko amžių tinkamą oro srauto greitį, vadovaudamiesi 2 pav. („Siurbimo galios reguliavimas“).

2pav. Siurbimogaliosregulavimas

Naugajimiams tinkama mažiausia skalės vertė, kūdikiams – vidurinė, o mažiems ir ikimokyklinio amžiaus vaikams – didžiausia. Prietaiso efektyvumui didelės įtakos turi gleivių tirštumas, ligos mastas ir unikali vaiko anatomija. Jei gleivės skystos, naudodami prietaisą galite rinktis mažesnę nuostatą, o jei gleivės tirštos, naudodami prietaisą galite rinktis didesnę nuostatą, nei įprastai.

Prietaisą gali naudoti tik suaugusieji. Neduokite paruošto naudoti prietaiso vaikui!

Kai naudojate prietaisą, laikykite vaiką stabilioje padėtyje. Pasisodinkite vaiką ant kelių ir laikykite jį arba pasodinkite jį vertikaliajoje padėtyje, nugarą paremdami pagalve. Taip pat galite pasodinti jį į kėdutę su pakelta nugaros atrama.



Neguldykite vaiko ant nugaros ir neužkimškite laisvos nosies angos! Įsitikinkite, kad užpakalinėje prietaiso dalyje esančios ventilacijos angos neuždengtos! Įspėjimas! Per ventilacijos angas iš prietaiso gali išeiti karštas oras! Prietaisui visiškai išsijungus ir pasibaigus vėsinimo fazei, atjunkite jį!

Įdėkite anksčiau dezinfekuotą ir nusausintą Colibri galvutę į vaiko nosį ir įjunkite prietaisą, paspausdami valdymo mygtuką (prietaisas veikia su paskutinį kartą nustatyta nuostata).

3 pav. Tinkamos Colibri galvutės padėties nustatymas

Įkiškite Colibri galvutės galiuką į nosį. Galiukas turi būti nukreiptas šiek tiek žemyn ir į išorę link akies obuolio. Šioje padėtyje galite švelniai judinti Colibri galvutę. Taikydami šį metodą, galite pasiekti angą, einančią link viršutinio žandikaulio sinusų, nepažeisdami nosies kriauklės gleivinės arba nosies pertvaros kapiliarų.

Retais atvejais gali būti, kad naujagimio nosytės šnervės yra per mažos galiuko įkišimui. Tokiu atveju galiuką pastatykite į nosytę taip, kad šnervė būtų visiškai uždengta. Nosies aspiratoriaus efektyvumas yra pakankamas, kad tinkamai išvalytumėte nosies kanalų.

Naudojant prietaisą, lankstaus vamzdelio jungtis turi būti nukreipta žemyn.

Patentuota Colibri galvutės konstrukcija gali atlaikyti iki 5 ml skysto skysčio ir saugo, kad gleivės nepatektų į lankstų vamzdelį.

Sausas ir labai tirštas nosies gleivės galima suskystinti naudojant fiziologinius tirpalus. Vienu metu nenaudokite daugiau nei 5 ml šių tirpalų, nes skysčiai patekus į vamzdelį jį gali pažeisti prietaisą!

Panaudoję tirpalą, palaukite kelias minutes ir servetėle nuvalykite tekančias gleives. Tik tada galima naudoti nosies aspiratorių.

Nosies lašai ir kiti gydytojų rekomenduoti vaistiniai preparatai turi būti naudojami po siurbimo procedūros!

Rekomenduojama siurbimo trukmė yra 10 sekundžių vienoje nosies angoje.

Jei turite nutraukti siurbimo procedūrą, išjunkite prietaisą. Varikliui visiškai išsijungus, galite jį paleisti iš naujo. Po 15 minučių nepertraukiamo naudojimo prietaisas išsijungia, bet jį galima paleisti iš naujo.

Pernelyg dažno naudojimo atveju arba jei neužtikrinama pakankama ventilacija, šiluminis jungiklis išjungia prietaisą ir saugumo sumetėmis prietaisą vėl pradėti naudoti galima praėjus apytiksliai 50 minučių.



Nenaudokite nosies aspiratoriaus nosies plovimui!

Nosiboo Pro nosies aspiratorių galima naudoti kelis kartus per dieną. Rekomenduojama kvėpavimo takus išvalyti prieš miegą ir maitinimą, kad būtų užfikrintas ramus vaiko kvėpavimas.

Nesukelkite vaikui skausmo; prietaisą įdėkite tinkamai ir taikykite tinkamą metodą.

Panaudoję prietaisą, visada jį išjunkite valdymo mygtuku.

Išjungus prietaisą, variklis kurį laiką veiks, kad atvėstų.

Neatjunkite prietaiso nuo maitinimo tinklo, kol jis visiškai neišsijungs!

Kai naudojate prietaisą, neuždenkite ventiliacijos angų, esančių prietaiso užpakalinėje dalyje.

Atjunkite prietaisą, kai jis visiškai išsijungs ir baigsis vėsinimo fazė.

Rekomenduojamas galios diapazonas:

- * 0,04–0,08 bar. Kūdikiams taikykite mažesnes diapazono vertes, o 4 metų amžiaus ir vyresniems vaikams – didesnes vertes.
- * Siurbimo galiai didelės įtakos turi gleivių tirštumas ir ligos mastas.

5. Gedimų šalinimas

Jei įtariate, kad yra Nosiboo Pro prietaiso gedimas, perskaitykite tolesnius du skyrius. Pirmiausia reikia peržiūrėti skyrių „Trikčių šalinimo vadovas“, kuriame pateikiami konkrečių problemų sprendimo pasiūlymai. Lentelėje galite rasti problemas ir trikčių šalinimo pasiūlymus. Jei šie pasiūlymai problemos išspręsti nepadeda, skyrius „Gedimų tvarkymo vadovas“ padės jums / jūsų pardavėjui / platintojui kuo greičiau nustatyti gedimą. Gedimo atveju atidžiai išnagrinėkite šiuos skyrius.

Gaminio neprisima atsakomybės už gaminių iš neteisėtų importo šaltinių gedimus!

Trikčių šalinimo vadovas

Gedimas	Priežastis	Rekomendacija
Prietaiso nepavyksta įjungti.	Neprijungtas kištukas.	Prijunkite maitinimo laidą prie prietaiso, tada prie 230 V lizdo.
Prietaiso nepavyksta įjungti.	Prietaisas saugumo sumetimais išjungtas dėl pernelyg dažno naudojimo.	Dėl savo vaiko sveikatos nustokite naudoti nosies aspiratorių. Prietaisą vėl naudoti galima po apytiksl. 50 minučių.
Sumažėjęs siurbimo intensyvumas.	Colibri galvutė užblokuota arba netinkamai surinkta.	Atskirkite ir nuvalykite prietaisą. Nudžiovinę, surinkite vadovaudamiesi naudotojo vadovu.
Sumažėjęs siurbimo intensyvumas.	Nusidėvėjo oro tinklėlis.	Pakeiskite oro tinklėlį, vadovaudamiesi naudotojo vadovo skyriumi „Priežiūra ir laikymas“.
vamzdelį pateko skysčių arba gleivių.	Colibri galvutė nebuvo laikoma tinkamoje padėtyje. Vamzdelio jungties taškas nebuvo nukreiptas žemyn.	Išjunkite prietaisą ir nuvalykite beinu-sausinkite Colibri galvutę ir vamzdelį. Patikrinkite oro tinklėlį ir, jei reikia, pakeiskite jį.
vamzdelį pateko skysčių arba gleivių.	Buvo naudota per daug fiziologinio tirpalo.	Sumažinkite fiziologinio tirpalo kiekį iki mažiau nei 5 ml. Išjunkite ir nuvalykite prietaisą bei nusausinkite Colibri galvutę ir vamzdelį. Patikrinkite oro tinklėlį ir, jei reikia, pakeiskite jį.

Jei įvykdžius skyriuje „Trikčių šalinimo vadovas“ pateiktus nurodymus prietaisas vis tiek tinkamai neveikia, peržiūrėkite skyrį „Gedimų tvarkymo vadovas“ su platintoju / pardavėju.

Gedimų tvarkymo vadovas

Garantija galioja 24 mėnesius po įsigijimo dienos. Ji galioja tik tuo atveju, jei prietaisas naudojamas pagal numatytąją paskirtį ir ant jo nėra pažeidimo požymių. Per kitą etapą reikia išsiaiškinti, ar yra gedimas ir ar gedimas atsirado dėl paties naudotojo kaltės, ar ne. Gamintojas suteikia 24 mėnesių garantiją, jei prietaisas naudojamas pagal numatytąją paskirtį. Tolesnes patikras namuose gali atlikti bet kuris naudotojas arba jas gali atlikti platinantis pardavėjas arba jo patikėtinis, jam pateikus užpildytą garantijos kortelę arba kvietimą. Platintojas arba juridinis asmuo, kuriam pavesta įvertinti gedimą, privalo užpildyti su naudotojo vadovu pateiktą garantijos kortelę arba pateikti savo garantijos dokumentą, išsamiai užfiksuoti trikčių šalinimo veiksmus ir perduoti šiuos duomenis gamintojui per 24 valandas.

Trikčių šalinimas

Išsamus aprašas

Garantijos užduotys

Apžiūra

Ar prietaiso apačioje yra visa etiketė.

Etiketės pažeidimo požymiai reiškia, kad prietaiso korpusas buvo atidarytas.

Dėl netinkamo prietaiso naudojimo garantija negalioja.

Kiti korpuso pažeidimo, įbrėžimo, sutrenkimo, nubraižymo, deformacijos, įbrėžimo aplink varžtus požymiai.

Prietaiso korpuso pažeidimo požymiai reiškia, kad prietaiso korpusas buvo atidarytas.

Dėl netinkamo prietaiso naudojimo garantija negalioja.

Teršalų ant oro tinklelio arba aplink jį pėdsakai. Angos už oro tinklelio pažeidimas, smėlis prietaiso viduje arba pėdsakai, rodantys, kad į prietaisą pateko smėlio.

Pernelyg stipriai užterštas oro tinklelis ir į prietaisą patekęs purvas reiškia, kad prietaisas buvo naudojamas netinkamai.

Dėl netinkamo prietaiso naudojimo garantija negalioja.

Bet koks vamzdelio užteršimas.

Į vamzdelį patekę teršalai reiškia, kad prietaisas buvo naudojamas netinkamai.

Dėl netinkamo prietaiso naudojimo garantija negalioja.

Rankinė patikra

Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite prietaiso maitinimo laidą jungtį.

Jei prijungto prietaiso jungtį (ne maitinimo laidą) galima pajudinti arba ištraukti, įjungti ir naudoti prietaisą yra pavojinga gyvybei! Tokių gedimų priežastis yra išorinis poveikis, todėl garantija jiems netaikoma.

Dėl netinkamo prietaiso naudojimo garantija negalioja.

Bet koks valdymo mygtuko gedimas.

Jei valdymo mygtukas, esantis prietaiso viršuje, pažeistas, užstrigęs, laisvai juda arba nukrenta, gedimo priežastis yra išorinis poveikis, todėl jam garantija netaikoma. Įjungti ir naudoti prietaisą yra pavojinga gyvybei!

Dėl netinkamo prietaiso naudojimo garantija negalioja.

Prijungimas prie maitinimo tinklo / įjungimas

Prietaisas prie maitinimo tinklo prijungiamas su prietaisu pateiktu maitinimo laidu.

Jei prietaisas nepradeda veikti esant šioms sąlygoms, rekomenduojama pakeisti maitinimo laidą. Tokių gedimų priežastis yra išorinis poveikis, todėl garantija jiems netaikoma.

Dėl netinkamo prietaiso naudojimo garantija negalioja.

Prietaisą galima prijungti prie maitinimo tinklo, bet įjungus prietaisą kyla trikdžių.

Jeį naudodami prietaisą susiduriate su neįprastais reiškiniais, pvz., maža siurbimo galia, skindančiais dūmais, stipriu kvapu, prietaisas neįprastai garsiai zvimbia ar traška, virpa, įvyksta trumpasis jungimas, prietaiso negalima reguliuoti valdymo mygtuku ir jis neišsijungia po 15 minučių.

Jeį naudodami prietaisą susiduriate su neįprastais reiškiniais, o an 1 prietaiso nėra fizinio pažeidimo požymių, įtrauktų į pirmuosius du punktus, kliento prietaisui gali būti taikoma garantija.

Garantijos užduotys

Nosiboo Pro prietaiso platintojas įsipareigoja skubiai spręsti klientų skundus, atsižvelgdamas į aspektus, nurodytus naudotojo vadovo skyriuose „Trikčių šalinimo vadovas“ ir „Gedimų tvarkymo vadovas“. Prietaiso platintojas įsipareigoja saugoti rašytinį įrašą apie trikčių šalinimą. Tai galima atlikti platintojo vidiniuose dokumentuose arba garantijos kortelėje, pateiktoje su naudotojo vadovu. Įrašė turi būti nurodytas aptiktas gedimas, data ir unikalus serijos numeris, pateiktas ant etiketės prietaiso apačioje.

Techninės priežiūros specialistų stoties kontaktiniai duomenys

Attract Kft.

H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 - Vengrija

Tel. +36 72 551 642 (nuo pirmadienio iki penktadienio, 8:00–16:00)

El. pašto adresas: customerservice@nosiboo.com

6. Priežiūra ir laikymas

Maitinimo laidą nuo maitinimo tinklo ir prietaiso atjungti galima tik pasibaigus vėsinimo procesui! Atjunkite vamzdelį nuo prietaiso ir Colibri galvutės. Už prijungimo elemento yra oro tinklelis, kuris saugo, kad į prietaisą nepatektų kietų objektų ir dulkių. Jei veikimas nefikėtai suprastėtų, rekomenduojama patikrinti oro tinkelį. Jei oro tinklelis purvinas arba užsikimšęs, pakeiskite jį atsarginiu oro tinkleliu. (Atsarginių dalių sąrašas pateiktas skyriuje „Priedai, atsarginės dalys“.)

1 pav. Oro tinklelio keitimas

Nuvalykite korpusą sausa, minkšta šluoste; nenaudokite jokių ploviklių ar chemikalų!

Prietaisą laikykite uždaroje vietoje, apsaugotą nuo dulkių ir žalos (pvz., spintoje).

Jei turite daugiau vaikų, rekomenduojame kiekvienam vaikui naudoti atskirą Colibri galvutę ir laikyti Colibri galvutes atskirai.

Nelaikykite šalia šilumos šaltinio!

7. Valymas

1. Nuimkite vamzdelį ir nosies antgalį, tuomet atskirkite galvutės korpusą.
2. Išplaukite žiedinį vamzdelį, nosies antgalį ir galvutės korpusą drungnu vandeniu ir indų plovikliu ir leiskite jiems nudžiūti.

4 pav. Colibri galvutės valymas

3. Nuvalykite prietaiso korpusą sausa, minkšta šluoste; nenaudokite jokių skysčių, ploviklių ar chemikalų.
4. Jei reikia, nušluostykite vamzdelį šluoste. Neplaukite vamzdelio.

8. Svarbi informacija apie elektromagnetinių trukdžių mažinimą

Namų belaidžio tinklo įranga, mobilieji telefonai ir belaidžiai telefonai gali turėti įtakos medicininės įrangos veikimui, nes tarp prietaisų gali atsirasti elektromagnetinių trukdžių. Elektromagnetiniai trukdžiai gali kelti kenksmingus trukdžius veikiantiems medicinos prietaisams, todėl gali kilti kritinių situacijų.


Dėl pirmiau paminėtų prietaisų medicinos prietaisai negali trukdyti jokiai kitai įrangai.

Siekiant užtikrinti elektromagnetinį suderinamumą, standartuose nustatyti reikiami reikalavimai. Standartai apibrėžia medicinos prietaisų apsaugos lygį ir didžiausią šių prietaisų skleidžiamos elektromagnetinės spinduliuotės vertę.

Nosiboo Pro nosies aspiratorius atitinka standarto EN 60601-1-2:2007 reikalavimus. Nepaisant to, naudodami prietaisą turite laikytis toliau pateiktų instrukcijų.

- * Šalia šio prietaiso nenaudokite mobiliojo ar belaidžio telefono ir jokio kito stiprią elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiančio prietaiso! Priešingu atveju prietaisas gali sugesti ir gali kilti kritinė situacija.
- * Rekomenduojama išlaikyti bent 5 m atstumą tarp prietaisų! Jei šis atstumas trumpesnis, patikrinkite, ar prietaisas tinkamai veikia!

9. Aplinka

Pasibaigus prietaiso naudojimo laikui, neišmeskite jo su buitinėmis atliekomis, nes elektroninių gaminių atliekos priskiriamos prie pavojingų atliekų. Tai nurodoma toliau pavaizduotu ženklu ant gaminio pakuotės: 

Colibri galvutė nekelia rimto pavojaus aplinkai, todėl ją galima išmesti su buitinėmis atliekomis.

10. Specifikacijos

Reguliuojamas variklio našumas: 200–390 W

Diferencinis slėgis: 0,04–0,08 bar

Maks. oro srautas: 54 l/min.

Maitinimo šaltinis: 230 V, 50–60 Hz

IP klasė: IP21

Apsaugos klasė: II

Su žmonėmis besiliečiančių dalių tipas: BF

Su žmonėmis besiliečiančios dalys: visas korpusas

Veikimo tipas: ne nuolatinis veikimas

Veikimo trukmė: įjungtas 15 min. / išjungtas apytiksliai 50 min.

Nepertraukiamo naudojimo trukmė: daugiausia 15 min.

Šiluminio jungiklio paleidimo temperatūra: 95 °C

Vidutinė korpuso temperatūra: 30–35 °C po 1 min. nepertraukiamo naudojimo

Triukšmo lygis: max. 70 dB

Temperatūros intervalas: nuo –10 °C iki +40 °C

Santykinis drėgnis: maks. 75 %

Numatoma korpuso (elektrinių dalių) naudojimo trukmė: 3 metai

Numatoma Colibri galvutės naudojimo trukmė: 3 mėnesiai

Į nosį kišamo Colibri galvutės galo skersmuo: min. 5,6 mm

Į nosį kišamo Colibri galvutės galo ilgis: min. 32 mm

Svoris (korpuso): 972 g

Matmenys (korpuso, P x A x I): 200 x 155 x 175 mm

Matmenys (visos pakuotės): 180 x 180 x 225 mm

Priedai, atsarginės dalys

Nosiboo Pro Accessory Set:

Priedų rinkinys su atsarginėmis „Nosiboo Pro“ detalėmis
<https://shop.nosiboo.eu/>



ACS-01-01 mėlynas

- * 1 Colibri galvutė
- * 2 antgaliai
- * 1 vamzdelis
- * 1 filtras
- * 1 šepetys



ACS-01-02 rožinis

- * 1 Colibri galvutė
- * 2 antgaliai
- * 1 vamzdelis
- * 1 filtras
- * 1 šepetys



ACS-01-03 žalias

- * 1 Colibri galvutė
- * 2 antgaliai
- * 1 vamzdelis
- * 1 filtras
- * 1 šepetys


Dalis galima užsisakyti iš techninės priežiūros specialistų stoties:

Attract Kft. H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 - Vengrija Tel. +36 72 551 642 (nuo pirmadienio iki penktadienio, 8:00–16:00)

E-mail: customerservice@nosiboo.com



Maitinimo laidas (ES)
NO-01-022-A6-0WE1

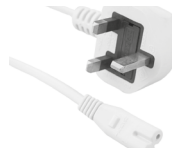

Maitinimo laidas (JK)
NO-01-022-A6-0WM3



Prijungimo elementas
NO-01-050-H2-7BXX * mėlynas
NO-01-050-H2-7PXX * rožinis
NO-01-050-H2-7GXX * žalias

Tarptautinė garantijos kortelė

Garantija galioja 24 mėnesius po įsigijimo dienos. Ji galioja tik tuo atveju, jei prietaisas naudojamas pagal numatytąją paskirtį ir ant jo nėra pažeidimo požymių. Garantiją patvirtina įgaliotasis prietaiso platintojas. (Būtina pateikti autentišką platintojo sąskaitą faktūrą.) Nosiboo Pro prietaiso platintojas įsipareigoja skubiai spręsti klientų skundus, atsižvelgdamas į aspektus, nurodytus naudotojo vadovo skyriuose „Triukščių šalinimo vadovas“ ir „Gedimų tvarkymo vadovas“. Prietaiso platintojas įsipareigoja saugoti rašytinį įrašą apie triukščių šalinimą. Tai galima atlikti platintojo vidiniuose dokumentuose arba garantijos kortelėje, pateiktoje su naudotojo vadovu. Įrašė turi būti nurodytas aptiktas gedimas, data ir unikalūs serijos numeris, pateiktas ant etiketės prietaiso apačioje.

Pildo platintojas

Platintojo pavadinimas ir adresas:

Nosiboo Pro nosies aspiratoriaus serijos numeris:
(pateiktas prietaiso apačioje, etiketėje)

Įsigijimo data:

Gedimo tipas:

Gedimo data:

Patvirtinantis platintojo parašas:
(data, parašas ir antspaudas)

Pildo techninės priežiūros stoties darbuotojas

Gavimo data:

Taisomos dalys:

Naujas serijos numeris:

Grąžinimo data:

Patvirtinantis techninės priežiūros stoties darbuotojo
parašas ir antspaudas:

Pakeistų dalių garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai.

Pildo platintojas

Platintojo pavadinimas ir adresas:

Nosiboo Pro nosies aspiratoriaus serijos numeris:
(pateiktas prietaiso apačioje, etiketėje)

Įsigijimo data:

Gedimo tipas:

Gedimo data:

Patvirtinantis platintojo parašas:
(data, parašas ir antspaudas)

Pildo techninės priežiūros stoties darbuotojas

Gavimo data:

Taisomos dalys:

Naujas serijos numeris:

Grąžinimo data:

Patvirtinantis techninės priežiūros stoties darbuotojo
parašas ir antspaudas:

Pakeistų dalių garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai.

Aiškliai išreikšta garantija neturi įtakos vartotojo numanomos garantijos teisėms!

Nosiboo Pro yra higieninis medicinos prietaisas. Gaminio atsisakymo teise pasinaudoti galite tik tuo atveju, jei prietaisas ir ant nosies antgalio esanti apsauginė plėvelė yra nepažeisti! Higienos sumetimais negalime pakeisti prietaiso, jei pakuotė buvo atidaryta.

Rekomendacinio pobūdžio ir galiojantys teisės aktai: Europos Parlamento ir Komisijos direktyvos 2011/83/ES 16 skyriaus e dalis, Austrijos Respublika: FAGG: 18 skyriaus 1 dalies 5 punktas, Vengrija: 45/2014. (II. 26.) Vyriausybės nutarimo 29 skyriaus 1 dalies e punktas.

Gaminio ir techninės priežiūros specialistų stotis: Attract Kft. Vengrija, H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 Tel. +36 72 551 642 (nuo pirmadienio iki penktadienio, 8:00–16:00)

El. pašto adresas: customerservice@nosiboo.com

nosiboo^{*}pro
electric nasal aspirator
www.nosiboo.eu